

Sortimentsübersicht  
**Phlebologie**



**memory**<sup>®</sup>

Die **elegante**  
medizinische Kompression

**lastofa**<sup>®</sup>

Die **vielseitige**  
medizinische Kompression

**ofa**<sup>®</sup> **basic**

Die **ökonomische**  
medizinische Kompression

**gilofa**<sup>®</sup>

Die **kompresiven**  
Vital- und Reisestrümpfe

**ofa**<sup>®</sup> **365**

Die **Wellness-Strümpfe**  
für jeden Tag

**ofa**<sup>®</sup>

# Neuigkeiten

Hier war eine Broschüre mit Ofa Neuigkeiten für Sie reserviert. Diese hat scheinbar schon jemandem vor Ihnen gefallen.

Kein Problem: Wählen Sie 0951 6047-333, wir senden Ihnen gerne Ihr persönliches Exemplar.

# Schnell ans Ziel – so erreichen Sie uns:

## Ein Login, zwei Plattformen

Mit unserem Onlineshop ofa24.de können Sie unsere Produkte in nur wenigen Schritten rund um die Uhr bestellen. Mithilfe unseres umfangreichen Produktkataloges, der Suche via Artikelnummer oder durch das Scannen des EAN-Codes gelangen Sie so schnell zum Ziel. Im Servicebereich finden Sie zudem alle wichtigen Informationen rund um Ihre Bestellung und zur Retourenabwicklung.

Zusätzliche Tipps und Anregungen, zum Beispiel zur Schaufensterdekoration, stellen wir regelmäßig im Fachhandelsportal unter portal.ofa24.de für Sie zusammen. Dort finden Sie auch unser umfangreiches Bildmaterial zum Herunterladen. Mit beiden Plattformen sind Sie bestens ausgerüstet, Ihren Arbeitsalltag optimal zu gestalten.

**Und sollten Sie doch einmal nicht weiterkommen,  
ist unser Vertriebsinnendienst nur einen Anruf weit entfernt.**

## Vertriebsinnendienst:

Tel.: 0951 6047-333

Fax: 0951 6047-180

E-Mail: [vertriebsinnendienst@ofa.de](mailto:vertriebsinnendienst@ofa.de)

Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr

## Vertriebsinnendienst Lymphologie:

Tel.: 0951 6047-336

Fax: 0951 6047-255

E-Mail: [lymphologie@ofa.de](mailto:lymphologie@ofa.de)

Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr



Mit exklusivem Fachhandelsportal  
[portal.ofa24.de](http://portal.ofa24.de)

[www.ofa24.de](http://www.ofa24.de)

Schnell, einfach, rund um die Uhr

## Phlebologie-Sortiment

Sortimentsübersicht Kompressionsstrümpfe	6–7
Sortimentsübersicht Prophylaxe	8–9
Innovatives Verpackungskonzept	10–11
Anmess-Tipps für Kompressionsstrümpfe	12–13

### memory®

Premium

Sortimentsübersicht	16–17
---------------------	-------

#### Memory

Größentabelle	16
Details und Farben	18–21
– Serie	23
– Maß	23

#### Memory Aloe Vera

Größentabelle	16
Pflegekonzept	24–27
– Serie	29
– Maß	29

#### Memory Men

Details	32
Größentabelle	33
– Serie	33
– Maß	33

### lastofa®

Komfort

Sortimentsübersicht	36–37
---------------------	-------

#### Lastofa

Details und Farben	38–39
Größentabelle	40
– Serie	41
– Maß	41

#### Lastofa Baumwolle

Größentabelle	42
– Serie	43
– Maß	43

#### Lastofa Verde

nachhaltig & innovativ

Größentabelle	47
– Serie	47

### ofa® basic

Basis

Größentabelle	48
– Serie	49
– Maß	49

### lastofa®

Flachstrick

#### Lastofa Flachstrick (Maß)

Sonderausführungen und Zusätze	52–53
--------------------------------	-------

#### Lastofa Forte mit Merinowolle

Sortimentsübersicht	55–60
Kompressionssegmente Bein	62–64
Kompressionssegmente Arm	66–67

#### Lastofa Extra mit Baumwolle

Sortimentsübersicht	68
Kompressionssegmente Bein	69
Kompressionssegmente Arm	70–71

Faxbestellblock Rundstrick

**Maß- und Serienprodukte:** Art.-Nr. 571009004

Faxbestellblöcke Flachstrick

**Hand- und Armversorgung:**

Art.-Nr. 571002026 (mit integrierter Bestellhilfe)

**Beinversorgung:**

Art.-Nr. 571002025 (mit integrierter Bestellhilfe)













**Beinversorgung:** Art.-Nr. 571002027 (blanko)

**Zehenversorgung:** Art.-Nr. 571002021















**Sortimentsübersicht  
Kompressionsstrümpfe**  
Rundstrick

# Premium

	Memory		Memory Aloe Vera		Memory Men	
	Kkl. 1, 2		Kkl. 2		Kkl. 1,2	
	Serie	Maß	Serie	Maß	Serie	Maß
	I – V		I – V		I – VI	
<b>Ausführung*</b>						
AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF		✓		✓		
AG	✓	✓	✓	✓		
AG/T						
AT	✓	✓	✓	✓		
AT/S	✓	✓	✓	✓		
AT/U	✓	✓	✓	✓		
AT/H						
AT/E						
<b>Form</b>						
langes Bein (bei AD, AG, AT)	✓		✓		✓	
kurzes Bein (bei AD, AG, AT)	✓		✓		✓	
weite Ausführung (bei AD, AG)	✓ (nur AG)		✓ (nur AG)			
<b>Fuß</b>						
kurzer Fuß	✓		✓		✓	
langer Fuß	✓		✓		✓	
asymmetrische Spitze		✓		✓		
Softspitze	✓	✓	✓	✓	✓	✓
offene Spitze	✓	✓	✓	✓		
geschlossene Spitze	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Haftband</b>						
Spitzenhaftband	✓	✓	✓	✓		
Noppenhaftband Fleur (mit Motiv)	✓	✓	✓	✓		
Noppenhaftband	✓	✓	✓	✓		
Silikonhaftband Casual						
Gummihaftband	✓	✓	✓	✓		
<b>Leibteil</b>						
Plus-Minus-Leibteil (Standard)	✓	✓	✓	✓		
Slipleibteil mit Strukturoptik	✓	✓	✓	✓		
<b>Farben</b>						
sahne 	✓	✓	✓	✓		
marzipan 	✓	✓	✓	✓		
honig 	✓	✓	✓	✓		
karamell 	✓	✓	✓	✓		
nougat 	✓	✓	✓	✓		
krokant 	✓	✓	✓	✓		
schoko/braun 	✓	✓	✓	✓		
blaubeere/navy 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mohn 	✓	✓	✓	✓		
lakritz/black 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
beige 					✓	✓
denim 					✓	✓
4 Modefarben (jährlich wechselnd)	✓	✓	✓	✓		

\* Verkaufseinheit bei AD, AF und AG ist Paar, sonst Stück. Bei Maß besteht ein Paar aus 2 Stück Medizinprodukten, da die Maße je Bein unterschiedlich sein können.

	Lastofa		Lastofa Baumwolle		Lastofa Verde	Ofa Basic	
	Kkl. 1, 2		Kkl. 2, 3		Kkl. 2	Kkl. 1, 2, 3**	
	Serie	Maß	Serie	Maß	Serie	Serie	Maß
	I – VI		I – VI		I – VI	I – VI	
Ausführung*							
AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AF		✓		✓			✓
AG	✓	✓	✓	✓		✓	✓
AG/T	✓	✓	✓	✓			✓
AT	✓	✓	✓	✓		✓	✓
AT/S							
AT/U	✓	✓		✓			✓
AT/H	✓	✓		✓			
AT/E		✓					
Form							
langes Bein (bei AD, AG, AT)	✓		✓		✓	✓	
kurzes Bein (bei AD, AG, AT)	✓		✓		✓	✓	
weite Ausführung (bei AD, AG)	✓ (nur AG)		✓			✓	
Fuß							
kurzer Fuß	✓		✓		✓	✓	
langer Fuß	✓		✓		✓	✓	
asymmetrische Spitze		✓					
Softspitze	✓	✓			✓		
offene Spitze	✓	✓	✓	✓		✓	✓
geschlossene Spitze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Haftband							
Spitzenhaftband				✓			✓
Noppenhaftband Fleur (mit Motiv)	✓	✓	✓	✓			
Noppenhaftband	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Silikonhaftband Casual	✓	✓					
Gummihaftband	✓	✓	✓	✓			
Leibteil							
Plus-Minus-Leibteil (Standard)			✓	✓		✓	✓
Slipleibteil mit Strukturoptik							
Farben							
salz 	✓	✓					
sesam 	✓	✓					
zimt 	✓	✓					
muskat 	✓	✓					
kornblume 	✓	✓					
wacholder 	✓	✓					
chia 	✓	✓					
pfeffer/schwarz 	✓	✓	✓	✓		✓	✓
marine 			✓	✓			
mode-hell 			✓	✓		✓	✓
mode 			✓	✓		✓	✓
walnuss 							✓

\* Verkaufseinheit bei AD, AF und AG ist Paar, sonst Stück. Bei Maß besteht ein Paar aus 2 Stück Medizinprodukten, da die Maße je Bein unterschiedlich sein können.

\*\* KKL 3 nur als Maßanfertigung

Ihr Vertriebsinnendienst: Tel. 0951 6047-333

# Die Memory Verpackung – einfach Premium.

## Premium verpackt

Die neuen Memory-Verpackungen präsentieren sich in einem edlen, puristischen Design in Weiß mit glänzenden Gold- oder Grüntönen. Auf den ersten Blick wird deutlich, dass sie hochwertige Medizinprodukte beinhalten. Der Produktname und die speziellen Eigenschaften sind sehr präsent und unterstützen Ihre Argumentation im Beratungsgespräch.

Darüber hinaus haben die neuen Verpackungen eine angenehme Haptik, so dass der Premiumcharakter bereits bei der ersten Berührung spürbar ist. Die Handhabung ist durch das Herausziehen des farbigen Innenteils noch einfacher geworden und unterstützt eine professionelle Produktpräsentation.

Ein weiterer Pluspunkt der neuen Verpackungen ist ihre Nachhaltigkeit. Sie sind ohne zusätzlichen Aufwand über die Altpapiertonne recyclebar.

## Die Etiketten

Memory Kompressionsstrümpfe erhalten Sie in einer sehr großen Anzahl an Varianten. Daher haben wir den Fokus auf eine besonders übersichtliche Artikelbeschreibung gelegt.

Alle Produktdetails erkennen Sie auf einen Blick: Ausführung, Fuß und Abschluss sind in schnell erfassbaren Illustrationen, in der jeweiligen Strumpffarbe, abgebildet. So behalten Sie auch bei umfangreicher Lagerhaltung den Überblick.

Alle weiteren Informationen sind gut sortiert angeordnet und möglichst groß dargestellt. Der Aufkleber an der Seite der Verpackung ist selbstklebend und abziehbar. Er enthält die wichtigsten Produktdaten für Ihre Unterlagen in kompakter Form.



**Jede Maßbestellung wird für Ihre Patienten nach deren Bedürfnissen und Wünschen angefertigt. So individuell und hochwertig wie das Produkt ist auch unsere innovative Maßverpackung.**

## Die innovative Maßverpackung

Um Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern, sind alle wichtigen Daten übersichtlich auf der Außenseite zu finden. So wissen Sie auf einen Blick, welche Eigenschaften die Anfertigung hat und für wen sie bestimmt ist. Der Patientename steht zusätzlich oben auf der Schmalseite, damit Sie die richtige Packung unter vielen sicher herausgreifen können. Durch eine Stecklasche lässt sich die Maßverpackung einfach öffnen und wieder verschließen – ganz ohne Klebestreifen oder Zippverschluss. Auf der Innenseite der Lasche zeigen anschauliche Piktogramme, wie Kompressionsstrümpfe angezogen werden.

## Das Innenleben

Der funktional und übersichtlich aufgebaute individuelle Maßeinleger ist das Herzstück der Maßverpackung. Viele Krankenkassen bestehen bei der Abrechnung auf die gesamten Maß-Daten des Patienten. Deshalb liefert der Einleger das individuelle Maßschema gleich mit. Es ist im praktischen Rezeptformat gestaltet und lässt sich einfach abtrennen. Sie können es gemeinsam mit dem Rezept einschicken oder auch für die Verwaltung Ihrer Kundendaten verwenden. Ein weiteres geniales Detail ist der persönliche Strumpfpass für den Patienten. Die individuelle Zeitangabe und der Name des versorgenden Fachhändlers erinnern ihn an seine nächste Versorgung. Abgezogen und auf Scheckkartengröße zusammengeklebt passt er in jede Brieftasche.



Das individuelle Maßschema zur Vorlage bei der Krankenkasse wird im passenden Format mitgeliefert. Für die Abrechnung nur abtrennen und mit dem Rezept einschicken.



Der persönliche Strumpfpass erinnert den Patienten an seine nächste Versorgung. Einfach abziehen und zusammenkleben, fertig ist die handliche und stabile Scheckkarte.

# Kompressionsstrümpfe richtig anmessen



Das fachgerechte und exakte Maßnehmen ist die entscheidende Voraussetzung für den medizinisch korrekten Druckverlauf und eine optimale Passform des Strumpfes am Bein. Denn perfekt sitzende Kompressionsstrümpfe unterstützen den Blutrückfluss zum Herzen und verbessern zudem die Akzeptanz der Therapie beim Patienten.

Gemessen wird am unbedeckten Bein, das entstaut oder ödemfrei sein muss (Fingerdruckprobe im Fesselbereich: Bei Wasseransammlungen bleibt eine Delle). Idealerweise erfolgt daher das Maßnehmen kurz nach dem Aufstehen am Morgen oder nach Abnehmen des Kompressionsverbandes.

Die Messung erfolgt am Standbein des stehenden Patienten. Sind beide Beine des Patienten mit einem Strumpf zu versorgen, so ist jedes Bein einzeln zu vermessen.

Zunächst werden die Umfangsmaße ermittelt und die verschiedenen Messpunkte mithilfe eines weichen Stifts (z. B. Kajal) markiert. Die Längenmaße können dann anhand der markierten Stellen leicht ermittelt werden.

Gemessen wird von unten nach oben, genau an den in der Tabelle fixierten Messpunkten des Beins.

Anleitungsvideos zum Anmessen finden Sie unter [portal.ofa24.de](http://portal.ofa24.de).



## Faxbestellblock Rundstrick

**Maß- und Serienprodukte:** Art.-Nr. 571009004

## Faxbestellblöcke Flachstrick

### **Hand- und Armversorgung:**

Art.-Nr. 571002026 (mit integrierter Bestellhilfe)

### **Beinversorgung:**

Art.-Nr. 571002025 (mit integrierter Bestellhilfe)

**Beinversorgung:** Art.-Nr. 571002027 (blanko)

**Zehenversorgung:** Art.-Nr. 571002021




## Maßschema Beinversorgungen für alle Rund- und Flachsprickprodukte

Dieses Maßschema ist die Grundlage für alle Bestellformulare, die Sie als digitales Formular oder Faxbestellblatt für jeden Ihrer Kunden individuell ausfüllen.

$\ell$	length (Länge), wird jeweils von der Ferse bis zum jeweiligen Messpunkt gemessen
c	circumference (Umfang)
Maße	alle Maßangaben werden in Zentimetern (cm) gemessen

### Messpunkte

### Erläuterung

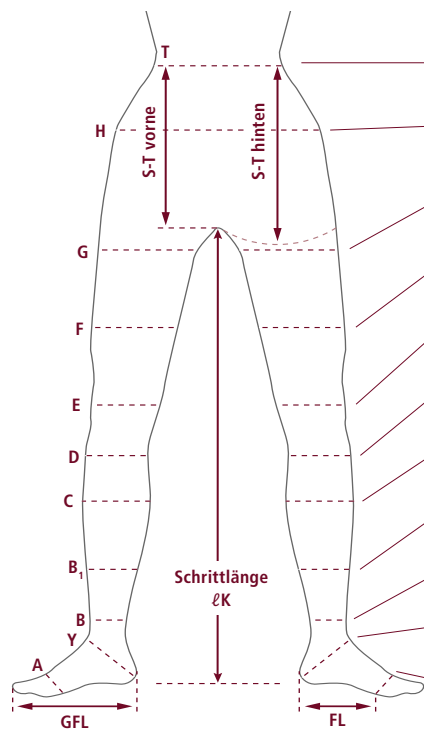

$\ell_K$  Schrittlänge, lotrecht gemessen ab dem Schritt (nicht ab Messpunkt G) bis Boden

S-T vorne Schritt bis Taille

S-T hinten Pofalte bis Taille

T Taille, bzw. oberer Abschluss der Strumpfhose (patientenspezifisch)

H Breiteste Stelle des Beckens

G 2 fingerbreit unterhalb des Schritts (Abschluss muss unterhalb der Gesäßfalte enden)

F Mitte des Oberschenkels

E Mitte der Kniescheibe (Umfangmaß bei leicht gebeugtem Knie messen)

D Fibula-Köpfchen (2 fingerbreit unter der Kniescheibe)

C Stärkste Stelle an der Wade

B<sub>1</sub> Wadenansatz

B Schlankste Stelle des Unterschenkels

Y Maß über Ferse und Spann bei maximaler Beugung des Fußes nach oben

A Zehengrundgelenk der kleinen Zehe

FL Fußlänge, Ferse bis Zehenansatz der kleinen Zehe

GFL Gesamtfußlänge, Ferse bis längste Zehenspitze





## reddot design award honourable mention 2012

Modisches Design und raffinierte  
Details. Dafür wurde Memory mit einem  
red dot design award ausgezeichnet!

# memory<sup>®</sup>

Die **elegante**  
medizinische Kompression

---

Sortimentsübersicht 16–17

### Memory

---

Größentabelle 16  
Farben und Details 18–21  
– Serie 23  
– Maß 23

### Memory Aloe Vera

---

Größentabelle 16  
Pflegekzept 24–27  
– Serie 29  
– Maß 29

### Memory Men

---

Details 32  
Größentabelle 33  
– Serie 33  
– Maß 33

**Memory**  
lakritz



# Unsere Premium Kompression


Modische Optik, elegante Details und ein besonders angenehmes Tragegefühl bei voller medizinischer Wirksamkeit – dafür stehen die Premium Kompressionsstrümpfe Memory, Memory Aloe Vera und Memory Men. Sie sind unsere passgenaue Versorgung für Ihre anspruchsvollen Kunden.

## Größentabelle

**Schrittlänge ℓK**  
kurz 69–78 cm  
lang 78,1–88 cm

**Länge ℓG**  
kurz 65–74 cm  
lang 74,1–84 cm

**Länge ℓD**  
kurz 34–38 cm  
lang 38,1–43 cm

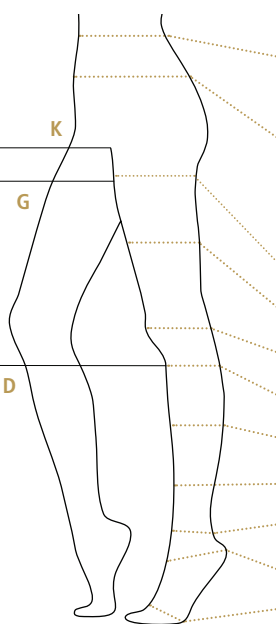

Umfang (cm)	I	II	III	IV	V
cT/U	75–100	80–110	85–120	95–130	100–135
cT	70–90	75–105	80–110	90–120	95–125
cH/U	90–115	95–125	100–140	105–145	115–155
cH	90–105	95–115	100–130	105–135	115–145
cG für AT	46–67	49–71	52–74	56–79	58–84
cG für AG weit	56–67	60–71	63–74	67–79	72–84
cG für AG	46–56	49–60	52–63	56–67	58–72
cF	39–53	41–56	45–60	46–62	47–64
cE	31–40	35–43	37–47	39–49	41–52
cD	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47
cC	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48
cB <sub>1</sub>	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40
cB	19–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30
cY	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38
cA	19–23	20–24	21–25	22–26	22–27

**Fußlänge bei geschlossener Spitze**  
kurz 22,5–25,9 cm (Schuhgröße 36–40)  
lang 26–29,5 cm (Schuhgröße 41–45)



Kkl. 1, 2

### Die elegante medizinische Kompression

Memory Kompressionsstrümpfe vereinen moderne Eleganz und angenehmen Tragekomfort. Mit zartem Glanz und dezenter Transparenz sind sie Feinstrümpfen zum Verwechseln ähnlich. Und dank trendiger Farben lassen sie sich leicht zu den neuesten Styles kombinieren.

- modische Feinstrumpfoptik
- weiche, hautfreundliche Funktionsgarne
- speziell entwickelte Kompressionsfäden, die das Anziehen erleichtern und sich der Beinform exakt anpassen
- Komfortzonen in der Kniekehle und am Spann
- zehn Standardfarben  
plus vier jährlich wechselnde Modefarben
- stilvolle Haftbänder

memory®




Kkl. 2

### Die elegante medizinische Kompression inklusive Hautpflege

Memory Aloe Vera verbindet die moderne Eleganz von Memory Kompressionsstrümpfen mit natürlicher Hautpflege. In das Garn integrierte Aloe-Vera- und Vitamin-E-Extrakte versorgen die Haut bei jedem Tragen mit Feuchtigkeit und können so trockener Haut und Juckreiz entgegenwirken.

- feuchtigkeitsspendende Hautpflege durch Aloe-Vera-Extrakte und Vitamin E
- pflegt die Haut während des Tragens
- modische Feinstrumpfoptik mit zartem Glanz und dezenter Transparenz
- speziell entwickelte Kompressionsfäden, die das Anziehen erleichtern und sich der Beinform exakt anpassen
- Komfortzonen in der Kniekehle und am Spann
- zehn Standardfarben  
plus vier jährlich wechselnde Modefarben
- stilvolle Haftbänder

memory® aloe vera

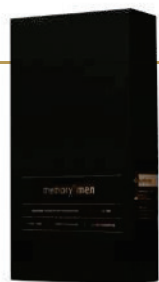

Kkl. 1, 2

### Die sportive medizinische Kompression

Memory Men, die Premium-Qualität für den Mann, überzeugt durch smarte Details. Der hohe Baumwollanteil sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Sein dezenter Look macht ihn business tauglich. Doch auch zum legeren Freizeit-Outfit passt der Herrenstrumpf perfekt.

- exakte Passform dank sechs Seriengrößen oder individueller Maßanfertigung
- zwei Bein- sowie zwei Fußlängen
- hoher Baumwollanteil
- elastische Fußspitze und Ferse
- weicher Abschlussrand
- hohe Strapazierfähigkeit

memory® men



memory®




## Farbpalette

Die zehn dauerhaft erhältlichen Farben bieten eine breite Auswahl an Hauttönen, Misch- und klassischen Farbtönen. Ergänzt wird das Sortiment von vier jährlich wechselnden Modefarben. So lassen sich Memory und Memory Aloe Vera Strümpfe ganz elegant zu den verschiedensten Modestyles kombinieren.

Jede einzelne Farbe wurde und wird mit viel Liebe zum Detail entwickelt. Deshalb klingen die Farben nicht nur verführerisch, sie wirken auch lebendig am Bein. So werden medizinische Kompressionsstrümpfe zum attraktiven Blickfang!

*Blaubeere*

memory  
memory **aloe vera**

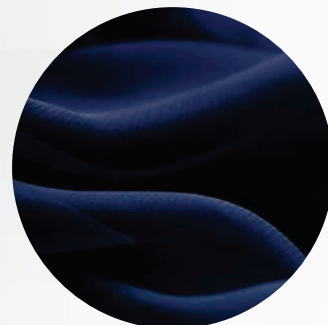

In unserer aktuellen **Memory-Farbbroschüre** stellen wir Ihnen unsere geschmackvolle Memory-Farbwelt vor und geben nützliche Stylingtipps.

Jetzt bestellen unter 0951 6047-333.

*sahne*

memory  
memory **aloe vera**



*marzipan*

memory (14 Tage Lieferzeit)  
memory **aloe vera** (14 Tage Lieferzeit)



*honig*

memory  
memory **aloe vera**



*karamell*

memory  
memory **aloe vera**



*krokant*

memory  
memory **aloe vera**



*nougat*

memory (14 Tage Lieferzeit)  
memory **aloe vera** (14 Tage Lieferzeit)



*schoko*

memory (14 Tage Lieferzeit)  
memory **aloe vera** (14 Tage Lieferzeit)



*mohn*

memory (14 Tage Lieferzeit)  
memory **aloe vera** (14 Tage Lieferzeit)



*lakritz*

memory  
memory **aloe vera**



memory®

# Ein schöner Abschluss

Ausführungen, Haftbänder und Details,  
die halten, was sie versprechen.



## *Kniestrumpf*

- feine Rippstruktur
- breites und weiches Abschlussbündchen
- zuverlässiger Halt
- atmungsaktives Garn



## *Slipleibteil*

- elegante Struktur-Optik
- figurformendes Gestrick
- optimierter Bein-Leibteil-Übergang
- atmungsaktives Garn



## *Haftbänder*

- Spitzenhaftband
- Noppenhaftband „fleur“
- Noppenhaftband
- Gummihaftband



### *Erscheinungsbild*

- zarter Glanz und dezente Transparenz
- stilvolle Details
- vier moderne Haftbänder und vierzehn stilvolle Farben

### *Tragegefühl*

- weiche, hautfreundliche Funktionsgarne
- speziell entwickelte Kompressionsfäden erleichtern das Anziehen
- geringeres Druckempfinden






### *Passform*

- Gestrick passt sich der Beinform exakt an
- verringerte Faltenbildung in der Kniekehle und am Spann










**Standard:** geschlossene Softspitze, Fuß kurz**Sonderausführungen:** AG in weiter Ausführung, AT/S Slipteil mit Strukturoptik**Besonderheiten:** 2 Fußlängen bei geschlossener Spitze,  
2 Beinlängen für AD, AG, AT, 2 Haftbandweiten, 2 Leibteilweiten

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
01 8101	 <b>AD</b>	1	Paar	17.06.01.0087
01 8201		2		17.06.01.1207
01 8104	 <b>AG mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.03.0078
01 8204		2		17.06.03.1197
01 8141	 <b>AT</b>	1	Stück	17.06.04.0085
01 8241		2		17.06.04.1159
01 8162	 <b>AT/S</b>	1	Stück	17.06.04.0085
01 8262		2		17.06.04.1159
01 8143	 <b>AT/U</b>	1	Stück	17.06.04.0085
01 8243		2		17.06.04.1159

**Standard:** geschlossene Softspitze**Sonderausführungen:** asymmetrische Softspitze, AT/S Slipteil mit Strukturoptik**Besonderheit:** individuelle Anfertigung

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 8101	 <b>AD ohne Haftband</b>	1	Paar	17.06.10.0056
02 8201		2		17.06.10.1097
02 8101	 <b>AD mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.10.0056
02 8201		2		17.06.10.1097
02 8103	 <b>AF mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.11.0048
02 8203		2		17.06.11.1079
02 8104	 <b>AG mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.12.0054
02 8204		2		17.06.12.1093
02 8141	 <b>AT</b>	1	Stück	17.06.13.0055
02 8241		2		17.06.13.1094
02 8162	 <b>AT/S</b>	1	Stück	17.06.13.0055
02 8262		2		17.06.13.1094
02 8143	 <b>AT/U</b>	1	Stück	17.06.13.0055
02 8243		2		17.06.13.1094

# Die pflegende Kompression



## **Trockene Haut gefährdet den Therapieerfolg**

Venenprobleme führen häufig, auch durch den medizinisch bedingten festen Sitz der Kompressionsstrümpfe, zu einem erhöhten Feuchtigkeitsbedarf der Haut. Trockenheit und Juckreiz an den Beinen sind mit die häufigsten Gründe für den Abbruch der Kompressionstherapie. Dabei unterstützt nur die tägliche Anwendung die Venen dauerhaft und senkt das Risiko weiterführender Folgen, wie z. B. Thrombosen.

## **Wir haben die Lösung:**

### **Kompressionsstrümpfe mit integrierter Hautpflege**

Memory Aloe Vera ist die innovative Kompression bei trockener Haut. Eine in das Garn eingearbeitete Kombination aus Aloe-Vera-Extrakten und Vitamin E pflegt die Haut während des Tragens – über 100 Wäschen lang.

## **Die Highlights von Memory Aloe Vera:**

- ins Garn integrierte Hautpflege
- feuchtigkeitsspendend durch Aloe-Vera-Extrakte und Vitamin E
- pflegt die Haut beim Tragen
- nachgewiesene Wirkung:  
weniger Hauttrockenheit und Juckreiz


## **Studie:**

### **Wirksamkeit von Memory Aloe Vera**

Die Wirksamkeit der hautpflegenden Kompressionsstrümpfe ist auch durch eine klinische Studie belegt.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

**[www.ofa.de/memory-aloe-vera](http://www.ofa.de/memory-aloe-vera)**

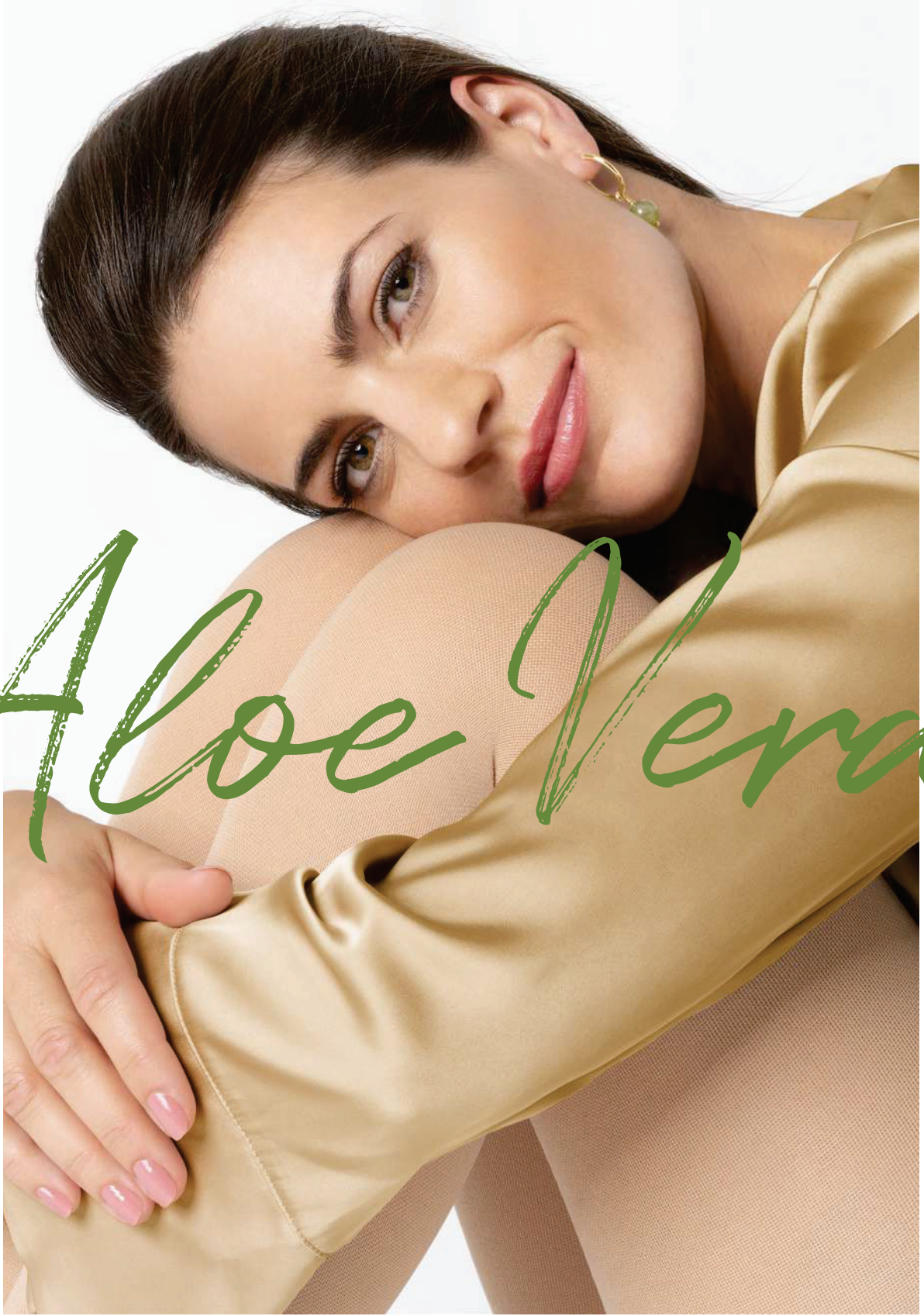

Aloe Vera





memory® aloe vera

# Pflege trifft Farbe

Nichts steht so für natürliche Feuchtigkeit wie Aloe Vera, denn die Extrakte der Pflanze sorgen für ein Wohlfühlerlebnis auf der Haut. Die Memory Aloe Vera Kompressionsstrümpfe

sind nicht nur pflegend, sondern überzeugen auch durch ihre elegante und feminine Optik. Sie sind in zehn Standard- sowie vier jährlich wechselnden Modifarben erhältlich.





# memory<sup>®</sup> aloe vera

Die **elegante**  
medizinische Kompression  
**inklusive Hautpflege**

Kompression  
inklusive  
Hautpflege



reddot design award  
honourable mention 2012

<b>Kompressionsklasse</b>	2
<b>Fußspitzen</b>	offene Spitze, geschlossene Softspitze, asymmetrische Softspitze bei Maß
<b>Haftbänder</b>	Spitzenhaftband, Noppenhaftband, Noppenhaftband Fleur (mit Motiv), Gummihftband
<b>Farben</b>	sahne, honig, karamell, krokant, blaubeere, lakritz 14 Tage Lieferzeit: marzipan, nougat, schoko, mohn, 4 Modefarben (jährlich wechselnd) (Bestellungen mit Lieferzeit sind vom Umtausch ausgeschlossen)








**Standard:** geschlossene Softspitze, Fuß kurz

**Sonderausführungen:** AG in weiter Ausführung, AT/S Slipleibteil mit Strukturoptik

**Besonderheiten:** 2 Fußlängen bei geschlossener Spitze,  
2 Beinlängen für AD, AG, AT, 2 Haftbandweiten, 2 Leibteilweiten

## memory<sup>®</sup> aloe vera Serie





Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
01 8001	 <b>AD</b>	2	Paar	17.06.01.1159
01 8004	 <b>AG</b> mit Haftband	2	Paar	17.06.03.1148
01 8041	 <b>AT</b>	2	Stück	17.06.04.1158
01 8062	 <b>AT/S</b>	2	Stück	17.06.04.1158
01 8043	 <b>AT/U</b>	2	Stück	17.06.04.1158

**Standard:** geschlossene Softspitze

**Sonderausführungen:** asymmetrische Softspitze, AT/S Slipleibteil mit Strukturoptik


**Besonderheit:** individuelle Anfertigung

## memory<sup>®</sup> aloe vera Maß

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 8001	 <b>AD</b> ohne Haftband	2	Paar	17.06.10.1102
02 8001	 <b>AD</b> mit Haftband	2	Paar	17.06.10.1102
02 8003	 <b>AF</b> mit Haftband	2	Paar	17.06.11.1080
02 8004	 <b>AG</b> mit Haftband	2	Paar	17.06.12.1098
02 8041	 <b>AT</b>	2	Stück	17.06.13.1093
02 8062	 <b>AT/S</b>	2	Stück	17.06.13.1093
02 8043	 <b>AT/U</b>	2	Stück	17.06.13.1093

memory<sup>®</sup> men

Die **sportive**  
medizinische Kompression

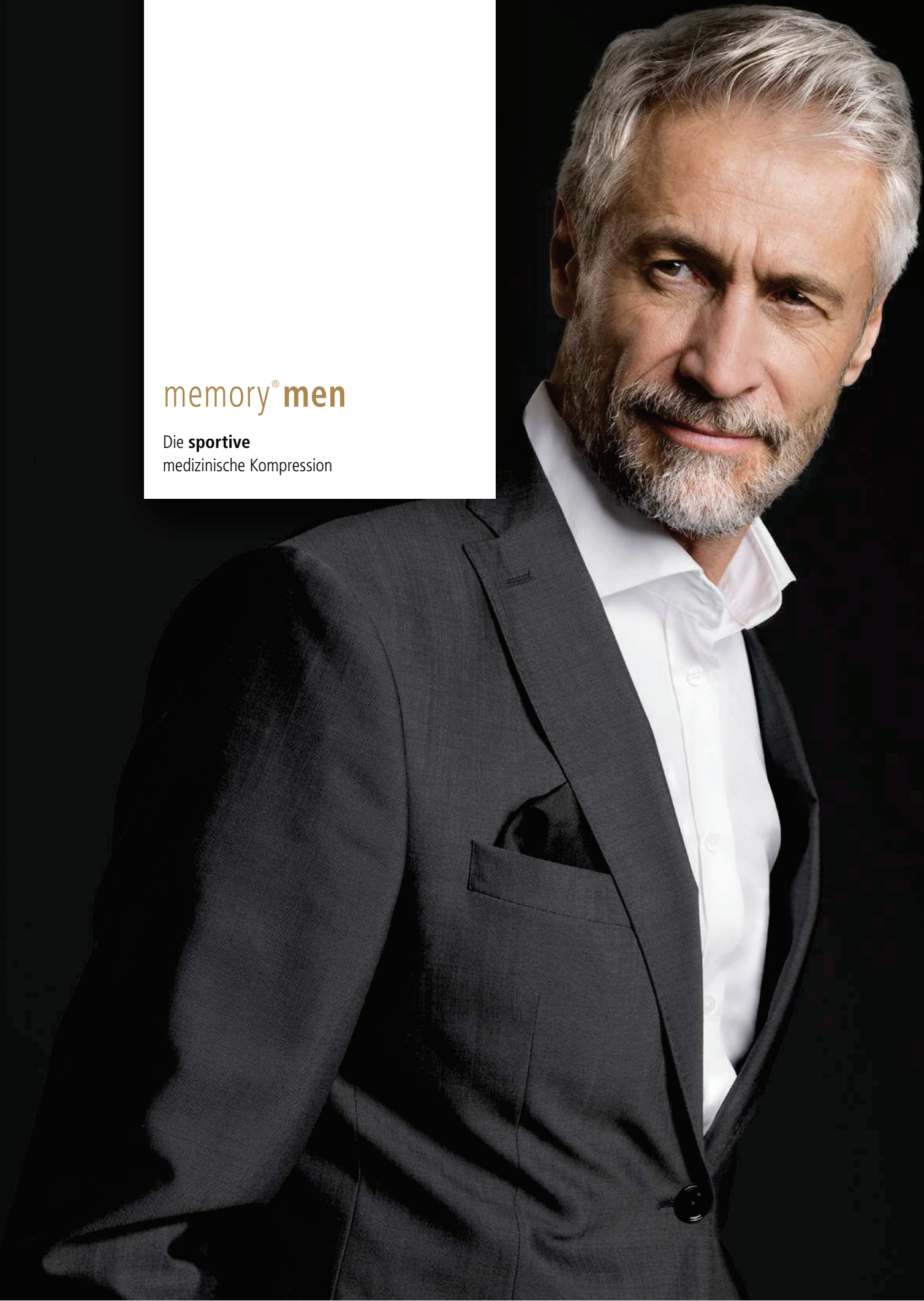



---

## Sportlich. Elegant. Stilvoll.

### Die sportive Premiumqualität: Memory Men

Beim Thema Kompressionstherapie legen Männer besonders großen Wert auf Diskretion. Deshalb bietet Ofa speziell für Herren den eleganten Memory Men Kompressionsstrumpf an. Er kann zur Venenbehandlung eingesetzt werden, gibt schweren Beinen wieder Frische und ist dabei dank seiner Herrenstrumpf-Optik nicht als medizinischer Kompressionsstrumpf zu erkennen.

Der hohe Baumwollanteil bietet einen angenehmen Tragekomfort und die funktionale Komfortzone am Fußrücken erleichtert das tägliche An- und Ausziehen. Die blickdichte Fußspitze lässt zudem den Zehen viel Bewegungsfreiheit.

Memory Men Kompressionsstrümpfe sind medizinisch wirksam, hautfreundlich und stilvoll – der ausgezeichnete Partner für gesunde Venen den ganzen Tag.



# Features.

Alle Highlights im Detail.



## Bund

Der breite und elastische Bund bietet sicheren Halt und beugt Rutschen und Einschneiden vor.

## Gestrick

Die unaufdringliche Rippstruktur verleiht dem Strumpf eine sportliche, maskuline Optik.

## Ferse

An der speziellen Pendelferse sorgt das verstärkte Material für einen optimalen Sitz und eine lange Haltbarkeit.


## Spitze

Die blickdichte Fußspitze lässt den Zehen viel Bewegungsfreiheit.

<b>Kompressionsklassen</b>	1, 2
<b>Fußspitze</b>	geschlossene Softspitze
<b>Farben</b>	beige, demin, navy, black 

**Größentabelle**

**Länge ℓD**  
**kurz** 34 – 38 cm  
**lang** 38,1 – 43 cm

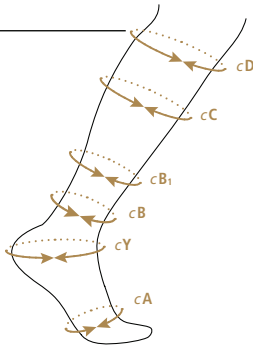


Umfang (cm)	I	II	III	IV	V	VI
<b>cD</b>	28 – 35	30 – 38	33 – 41	35 – 44	37 – 47	39 – 51
<b>cC</b>	29 – 36	32 – 40	34 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 52
<b>cB<sub>1</sub></b>	23 – 29	25 – 32	27 – 34	30 – 37	33 – 40	37 – 44
<b>cB</b>	19 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33
<b>cY</b>	28 – 32	29 – 34	30 – 35	32 – 36	33 – 38	34 – 39
<b>cA</b>	19 – 23	20 – 24	21 – 25	22 – 26	22 – 27	24 – 28

**Fußlänge mit geschlossener Spitze**  
**kurz** 22,5 – 25,9 cm (Schuhgröße 36 – 40)  
**lang** 26 – 29,5 cm (Schuhgröße 41 – 45)

**Standard:** geschlossene Softspitze  
**Besonderheiten:** 6 Größen, 2 Fußlängen bei geschlossener Spitze, 2 Beinlängen

memory<sup>®</sup> men  
**Serie**

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
01 8501	 <b>AD</b>	1	Paar	17.06.01.0115
01 8601		2		17.06.01.1184

In Einzelfällen können die Kniestrümpfe auch als Stückware bestellt werden.  
 Bitte wenden Sie sich an den Vertriebsinnendienst.

**Standard:** geschlossene Softspitze  
**Besonderheit:** individuelle Anfertigung

memory<sup>®</sup> men  
**Maß**

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 8501	 <b>AD</b>	1	Paar	17.06.10.0083
02 8601		2		17.06.10.1129







# lastofa®

Die **vielseitige**  
medizinische Kompression

---

Sortimentsübersicht 36–37

---

## Lastofa

Farben und Details 38–39  
Größentabelle 40  
– Serie 41  
– Maß 41

---

## Lastofa Baumwolle

Größentabelle 42  
– Serie 43  
– Maß 43

---

## Lastofa Verde

Größentabelle 47  
– Serie 47





lastofa®

Die **vielseitige**  
medizinische Kompression

---

## Mehr Komfort. Für Sie und Ihn. Für jeden Tag.

Lastofa ist der Allrounder im Sortiment von Ofa und bietet hohen Komfort für Männer und Frauen. Der moderne, alltagstaugliche Strumpf ermöglicht zuverlässigen Halt in unterschiedlichen Situationen: bei der Arbeit, in der Freizeit, zu Hause oder unterwegs.

Frauen wie Männer schätzen das schlichte, zurückhaltende Design der beliebten Unisex-Qualität. Lastofa ist die passende Versorgung, auch für Patienten mit fortgeschrittenem Venenleiden oder schwächerem Bindegewebe.



Kkl. 1, 2

lastofa®

### Die vielseitige medizinische Kompression

Lastofa bietet ausgezeichneten Komfort für Männer und Frauen. Durch seine matte Optik wirkt der Kompressionsstrumpf unauffällig und dezent. Dabei ist das blickdichte Gestrick angenehm weich und glatt auf der Haut. Extra bequeme Komfortzonen in der Kniekehle und am Fußgelenk sorgen für eine exakte Passform. Die spezielle Garnkonstruktion macht Lastofa strapazierfähig und ermöglicht leichtes Anziehen. Lastofa ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich.

- dezente und matte Optik
- blickdichtes und glattes Gestrick
- Komfortzonen für exakte Passform in der Kniekehle und am Fußgelenk
- verbesserte Strapazierfähigkeit durch Verstärkungen an Ballen und Ferse
- große Vielfalt und komfortable Details
- als Serien- und Maßanfertigung



Kkl. 2, 3

lastofa® baumwolle

### Die vielseitige medizinische Kompression mit Baumwolle

Lastofa Baumwolle wird wegen der guten Hautverträglichkeit besonders gern von Patienten mit empfindlicher Haut und von Allergikern getragen. Das liegt auch an der speziellen Garnkonstruktion, denn sie ermöglicht, dass nur Baumwolle direkt in Kontakt mit der Haut kommt. Durch das feste Gestrick ist diese Qualität besonders für Patienten mit weichem Bindegewebe und zur Behandlung schwerer Indikationen geeignet.

- gute Hautverträglichkeit, besonders für Patienten mit empfindlicher Haut und Allergiker
- auch für weiches Bindegewebe geeignet
- nur Baumwolle direkt auf der Haut
- temperatenausgleichender Materialmix
- exakte Passform
- Serien- und Maßanfertigung



Kkl. 2

lastofa® verde

### Die nachhaltige und umweltschonende Kompression

Nachhaltig, weil wir für Lastofa Verde erstmals ein **Bio-Garn** verwenden, das aus pflanzlichem Rizinusöl gewonnen wird. Und nachhaltig auch, weil Lastofa Verde zu **100 % natürlich** mit Farbstoff aus Walnusschalen gefärbt wird. So verzichten wir auf chemische Zusätze und schonen die Umwelt.

- blickdichtes, glattes Gestrick
- moderne, dezente Optik
- angenehm weiches Tragegefühl
- Komfortzonen für eine angenehme Passform
- in einem natürlich gefärbten Hautton

---

# Acht Zutaten für mehr Geschmack. Die Lastofa-Farben.



lastofa

**salz**




lastofa

**sesam**




lastofa

**zimt**

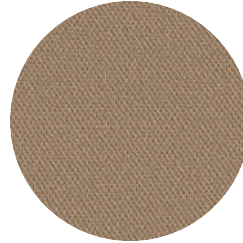

lastofa


**muskat**

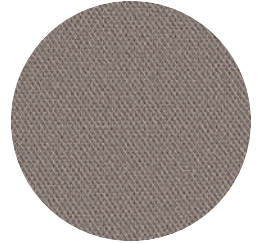

lastofa


7 Tage Lieferzeit

**kornblume**

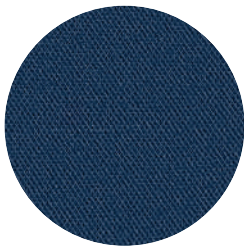

lastofa

**wacholder**

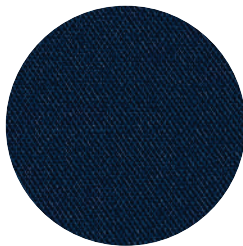

lastofa

**chia**



lastofa

**pfeffer**



---

# Beste Haltungsnoten. Die Lastofa-Haftbänder.


lastofa

**Noppenhaftband  
Noppenhaftband Strong**




lastofa

**Silikonhaftband Casual**

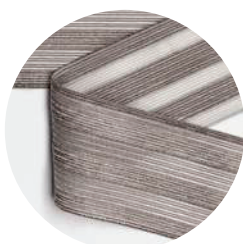

lastofa

**Noppenhaftband Fleur**

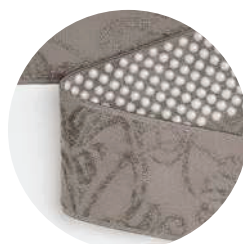

lastofa

**Gummihaftband**





## Die Lastofa Highlights:

---

- moderne, dezente Optik
- blickdichtes, glattes Gestrick
- Komfortzonen für eine angenehme Passform
- leichteres Anziehen
- angenehm weiches Tragegefühl
- verbesserte Strapazierfähigkeit durch Verstärkungen an Ballen und Ferse
- große Vielfalt
- komfortable Details
- als Serien- und Maßanfertigung

<b>Kompressionsklassen</b>	1, 2
<b>Fußspitzen</b>	offene Spitze, geschlossene Softspitze, asymmetrische Softspitze und geschlossene Softspitze bei Maß
<b>Haftbänder</b>	Silikonhaftband Casual, Noppenhaftband Fleur (mit Motiv), Noppenhaftband, Noppenhaftband Strong, Gummihaftband
<b>ohne Haftband</b>	Trikotrand (Lieferzeit auf Anfrage)
<b>Farben</b>	salz, sesam, zimt, muskat, wacholder, chia, pfeffer 7 Tage Lieferzeit: kornblume (Bestellungen mit Lieferzeit sind vom Umtausch ausgeschlossen)




## Größentabelle

**Schrittlänge ℓK**  
kurz 69–78 cm  
lang 78,1–88 cm

**Länge ℓG**  
kurz 65–74 cm  
lang 74,1–84 cm

**Länge ℓD**  
kurz 34–38 cm  
lang 38,1–43 cm

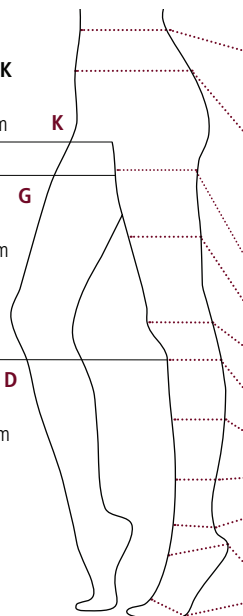








Umfang (cm)	I	II	III	IV	V	VI
<b>cT/U</b>	75–100	80–110	85–120	95–130	100–135	105–140
<b>cT</b>	70–90	75–105	80–110	90–120	95–125	100–130
<b>cH/U</b>	90–115	95–125	100–140	105–145	115–155	120–165
<b>cH</b>	90–105	95–115	100–130	105–135	115–145	120–155
<b>cG für AG/T; AT</b>	46–67	49–71	52–74	56–79	58–84	62–89
<b>cG für AG weit</b>	56–67	60–71	63–74	67–79	72–84	76–89
<b>cG für AG</b>	46–56	49–60	52–63	56–67	58–72	62–76
<b>cF</b>	39–53	41–56	45–60	46–62	47–64	49–68
<b>cE</b>	31–40	35–43	37–47	39–49	41–52	43–56
<b>cD</b>	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47	39–51
<b>cC</b>	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48	41–52
<b>cB<sub>1</sub></b>	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40	37–44
<b>cB</b>	19–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
<b>cY</b>	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38	34–39
<b>cA</b>	19–23	20–24	21–25	22–26	22–27	24–28

**Fußlänge bei geschlossener Spitze**  
kurz 22,5–25,9 cm (Schuhgröße 36–40)  
lang 26–29,5 cm (Schuhgröße 41–45)












**Fußlänge bei offener Spitze (Länge A–Y)**  
kurz 15–18,4 cm / lang 18,5–22 cm



**Standard:** geschlossene Softspitze, Fuß kurz**Sonderausführung:** AG in weiter Ausführung**Besonderheiten:** 6 Größen (I–VI), 2 Fußlängen bei offener und geschlossener Spitze, 2 Beinlängen für AD; AG; AT, 2 Haftbandweiten, 2 Leibteilweiten

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
01 5101	 <b>AD</b>	1	Paar	17.06.01.0106
01 5301		2		17.06.01.1173
01 5104	 <b>AG ohne Haftband</b>	1	Paar	17.06.03.0095
01 5304		2		17.06.03.1160
01 5104	 <b>AG mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.03.0095
01 5304		2		17.06.03.1160
01 5147	 <b>AG/T rechts oder links angeben</b>	1	Stück	17.06.03.0095
01 5347		2		17.06.03.1160
01 5141	 <b>AT</b>	1	Stück	17.06.04.0099
01 5341		2		17.06.04.1168
01 5143	 <b>AT/U</b>	1	Stück	17.06.04.0099
01 5343		2		17.06.04.1168
01 5146	 <b>AT/H Herrenhose mit Querschlit</b>	1	Stück	17.06.04.0099
01 5346		2		17.06.04.1168

**Standard:** geschlossene Softspitze**Sonderausführungen:** asymmetrische Softspitze, variable geschlossene Softspitze**Besonderheit:** individuelle Anfertigung

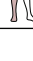Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 5101	 <b>AD ohne Haftband</b>	1	Paar	17.06.10.0076
02 5301		2		17.06.10.1120
02 5101	 <b>AD mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.10.0076
02 5301		2		17.06.10.1120
02 5103	 <b>AF ohne Haftband</b>	1	Paar	17.06.11.0055
02 5303		2		17.06.11.1088
02 5103	 <b>AF mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.11.0055
02 5303		2		17.06.11.1088
02 5104	 <b>AG ohne Haftband</b>	1	Paar	17.06.12.0069
02 5304		2		17.06.12.1111
02 5104	 <b>AG mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.12.0069
02 5304		2		17.06.12.1111
02 5147	 <b>AG/T rechts oder links angeben</b>	1	Stück	17.06.12.0069
02 5347		2		17.06.12.1111
02 5141	 <b>AT</b>	1	Stück	17.06.13.0065
02 5341		2		17.06.13.1107
02 5143	 <b>AT/U</b>	1	Stück	17.06.13.0065
02 5343		2		17.06.13.1107
02 5146	 <b>AT/H Herrenhose mit Querschlit</b>	1	Stück	17.06.13.0065
02 5346		2		17.06.13.1107
02 5145	 <b>AT/E Einbeinhose, rechts oder links angeben</b>	1	Stück	17.06.13.0065
02 5345		2		17.06.13.1107

# lastofa<sup>®</sup> baumwolle

<b>Kompressionsklassen</b>	2, 3
<b>Fußspitzen</b>	offene Spitze, geschlossene Spitze
<b>Haftbänder</b>	Spitzenhaftband (nur Maß), Noppenhaftband, Noppenhaftband Fleur (mit Motiv), Gummihaftband
<b>ohne Haftband</b>	Trikotrand (nur als Maßanfertigung)
<b>Farben</b>	mode-hell, mode, marine, schwarz 




## Größentabelle

**Länge  $\ell_K$**   
 kurz 69–78 cm  
 lang 78,1–88 cm  
 Schrittlänge

**Länge  $\ell_G$**   
 kurz 65–74 cm  
 lang 74,1–84 cm

**Länge  $\ell_D$**   
 kurz 34–38 cm  
 lang 38,1–43 cm

**Fußlänge bei geschlossener Spitze**  
 kurz 22,5–25,9 cm  
 (Schuhgröße 36–40)  
 lang 26–29,5 cm  
 (Schuhgröße 41–45)

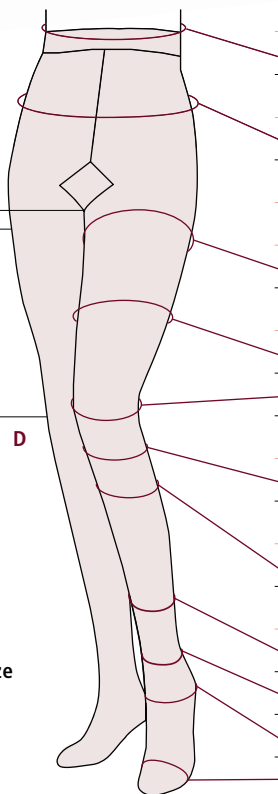

Umfang (cm)	I	II	III	IV	V	VI
<b>cT/U</b>	70–92	75–97	83–105	90–110	95–120	100–125
<b>cT</b>	62–84	67–89	74–98	80–102	85–108	90–115
<b>cH/U</b>	80–110	87–120	95–125	100–130	110–140	115–150
<b>cH</b>	71–95	76–100	84–116	90–127	98–137	105–148
<b>cG für AG weit</b>	51–60	54–63	58–68	63–74	67–79	71–88
<b>cG für AG</b>	44–53	46–56	50–60	53–64	57–70	61–80
<b>cG für AG/T; AT</b>	42–55	44–58	48–62	50–67	53–73	56–80
<b>cF für AG weit</b>	47–55	49–58	53–62	56–66	58–69	59–71
<b>cF</b>	39–47	41–50	45–54	46–57	47–60	49–62
<b>cE</b>	28–36	32–40	34–42	36–46	38–49	40–52
<b>cD für AD weit</b>	32–36	34–40	36–43	39–48	41–51	43–54
<b>cD</b>	29–32	30–35	32–38	33–42	35–45	37–48
<b>cC für AD weit</b>	32–37	35–41	38–45	40–49	42–52	44–55
<b>cC</b>	28–33	31–36	32–39	35–43	37–46	39–49
<b>cB<sub>1</sub> für AD weit</b>	25–29	27–31	29–33	32–36	34–39	38–43
<b>cB<sub>1</sub></b>	24–27	25–29	27–31	29–33	31–36	35–40
<b>cB</b>	19,5–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
<b>cY</b>	26–30	27–32	29–34	30–37	32–39	33–41
<b>cA</b>	19,5–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33

**Standard:** offene Spitze, Fuß kurz

**Sonderausführung:** AD und AG in weiter Ausführung

**Besonderheiten:** 6 Größen (I–VI), 2 Fußlängen bei geschlossener Spitze,  
2 Beinlängen für AD, AG, AT, 2 Kniestrumpfweiten, 2 Haftbandweiten, 2 Leibteilweiten

## lastofa® baumwolle Serie










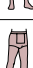
Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
01 3401 01 3501	 <b>AD</b>	2 3	Paar	17.06.01.1038 17.06.01.2021
01 3404 01 3504	 <b>AG</b> mit Haftband	2 3	Paar	17.06.03.1035 17.06.03.2019
01 3447 01 3547	 <b>AG/T</b> rechts, links oder Paar angeben	2 3	Stück	17.06.03.1035 17.06.03.2019
01 3441 01 3541	 <b>AT</b>	2 3	Stück	17.06.04.1030 17.06.04.2013

Komfort

**Standard:** offene Spitze

**Besonderheit:** individuelle Anfertigung

## lastofa® baumwolle Maß

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 3401 02 3501	 <b>AD</b> ohne Haftband	2 3	Paar	17.06.10.1041 17.06.10.2012
02 3401 02 3501	 <b>AD</b> mit Haftband	2 3	Paar	17.06.10.1041 17.06.10.2012
02 3403 02 3503	 <b>AF</b> ohne Haftband	2 3	Paar	17.06.11.1045 17.06.11.2017
02 3403 02 3503	 <b>AF</b> mit Haftband	2 3	Paar	17.06.11.1045 17.06.11.2017
02 3404 02 3504	 <b>AG</b> ohne Haftband	2 3	Paar	17.06.12.1039 17.06.12.2012
02 3404 02 3504	 <b>AG</b> mit Haftband	2 3	Paar	17.06.12.1039 17.06.12.2012
02 3447 02 3547	 <b>AG/T</b> rechts, links oder Paar angeben	2 3	Stück	17.06.12.1039 17.06.12.2012
02 3441 02 3541	 <b>AT</b>	2 3	Stück	17.06.13.1037 17.06.13.2011
02 3443 02 3543	 <b>AT/U</b>	2 3	Stück	17.06.13.1037 17.06.13.2011
02 3446 02 3546	 <b>AT/H</b> Herrenhose mit Längsschlitz	2 3	Stück	17.06.13.1037 17.06.13.2011





# lastofa<sup>®</sup> verde

Die erste **nachhaltige**  
medizinische Kompression










## Wir machen den ersten Schritt. Lastofa Verde schont die Umwelt.

Lastofa Verde ist der erste nachhaltige Kompressionsstrumpf. Nachhaltig, weil wir für Lastofa Verde ein Bio-Garn verwenden, das aus pflanzlichem Rizinusöl gewonnen wird. Und nachhaltig auch, weil Lastofa Verde zu 100 % natürlich gefärbt wird. So können wir auf chemische Zusätze verzichten und die Umwelt schonen.


Lastofa Verde ist als Kniestrumpf in Kompressionsklasse 2 und sechs Größen erhältlich. Ein Schritt in eine nachhaltige Zukunft. Informieren Sie Ihre Kunden über dieses innovative Produkt und helfen Sie mit, umweltschonend produzierte Kompressionsstrümpfe zu einem Erfolg zu machen.

\* Im Vergleich zu einem Standard Polyamid des Garnherstellers.

<b>Kompressionsklasse</b>	2
<b>Fußspitze</b>	geschlossene Softspitze
<b>Farbe</b>	walnuss 

**Größentabelle**

**Länge  $\ell D$**   
**kurz** 34–38 cm  
**lang** 38,1–43 cm

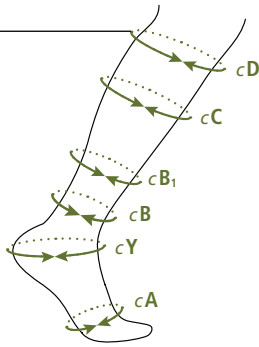

<b>Umfang (cm)</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>
<b>cD</b>	28–35	30–38	33–41	35–44	37–47	39–51
<b>cC</b>	29–36	32–40	34–43	37–45	39–48	41–52
<b>cB<sub>1</sub></b>	23–29	25–32	27–34	30–37	33–40	37–44
<b>cB</b>	19–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
<b>cY</b>	28–32	29–34	30–35	32–36	33–38	34–39
<b>cA</b>	19–23	20–24	21–25	22–26	22–27	24–28


**Fußlänge mit geschlossener Spitze**

**kurz** 22,5–25,9 cm (Schuhgröße 36–40)  
**lang** 26–29,5 cm (Schuhgröße 41–45)

**Standard:** geschlossene Spitze

**Besonderheiten:** 6 Größen, 2 Fußlängen bei geschlossener Spitze, 2 Beinlängen

lastofa® **verde**  
**Serie**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Ausführungen</b>	<b>Kkl.</b>	<b>Einheit</b>	<b>Farbe</b>	<b>Hilfsmittel-Nr.</b>
01 5801	 <b>AD</b>	2	Paar	walnuss	17.06.01.1218

In Einzelfällen können die Kniestrümpfe auch als Stückware bestellt werden.  
 Bitte wenden Sie sich an den Vertriebsinnendienst.

# ofa<sup>®</sup> basic

Die **ökonomische**  
medizinische Kompression

Die hochwertige Grundversorgung verfügt über die volle medizinische Wirksamkeit, belegt durch das RAL-Gütezeichen. Eine limitierte Auswahl an Farben und Ausführungen ermöglicht eine individuelle, maßgerechte Kompressionstherapie, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten.

Blickdicht, für Damen und Herren geeignet.


## Größentabelle

**Länge ℓK**  
kurz 69–78 cm  
lang 78,1–88 cm  
Schrittlänge **K**

**Länge ℓG**  
kurz 65–74 cm  
lang 74,1–84 cm  
**G**

**Länge ℓD**  
kurz 34–38 cm  
lang 38,1–43 cm  
**D**

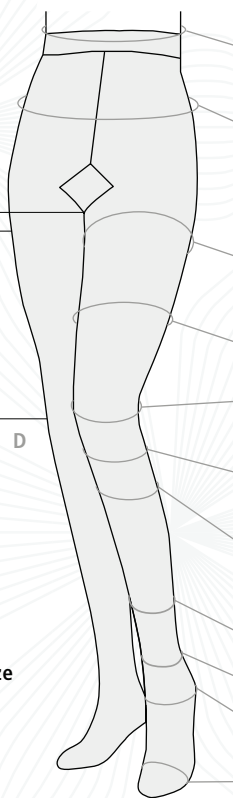


**Fußgröße bei geschlossener Spitze**  
kurz 22,5–25,9 cm  
(Schuhgröße 36–40)  
lang 26–29,5 cm  
(Schuhgröße 41–45)












Umfang (cm)	I	II	III	IV	V	VI
cT/U	70–92	75–97	83–105	90–110	95–120	100–125
cT	62–84	67–89	74–98	80–102	85–108	90–115
cH/U	80–110	87–120	95–125	100–130	110–140	115–150
cH	71–95	76–100	84–116	90–127	98–137	105–148
cG für AG weit	51–60	54–63	58–68	63–74	67–79	71–88
cG für AG	44–53	46–56	50–60	53–64	57–70	61–80
cG für AT	42–55	44–58	48–62	50–67	53–73	56–80
cF für AG weit	47–55	49–58	53–62	56–66	58–69	59–71
cF	39–47	41–50	45–54	46–57	47–60	49–62
cE	28–36	32–40	34–42	36–46	38–49	40–52
cD für AD weit	32–36	34–40	36–43	39–48	41–51	43–54
cD	29–32	30–35	32–38	33–42	35–45	37–48
cC für AD weit	32–37	35–41	38–45	40–49	42–52	44–55
cC	28–33	31–36	32–39	35–43	37–46	39–49
cB <sub>1</sub> für AD weit	25–29	27–31	29–33	32–36	34–39	38–43
cB <sub>1</sub>	24–27	25–29	27–31	29–33	31–36	35–40
cB	19,5–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
cY	26–30	27–32	29–34	30–37	32–39	33–41
cA	19,5–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33



**Standard:** offene Spitze**Kompressionsklassen:** 1, 2**Besonderheiten:** 6 Größen (I-VI), 2 Fußlängen bei geschlossener Spitze, 2 Beinlängen, 2 Kniestrumpfweiten, 2 Haftbandweiten, 2 Leibteilweiten**Haftband:** Noppenhaftband**Farben:** mode-hell, mode, schwarz

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
01 9201	 <b>AD</b>	1	Paar	17.06.01.0111
01 9401		2		17.06.01.1177
01 9204	 <b>AG mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.03.0098
01 9404		2		17.06.03.1162
01 9241	 <b>AT</b>	1	Stück	17.06.04.0103
01 9441		2		17.06.04.1174

**Standard:** offene Spitze**Kompressionsklassen:** 1, 2, 3 (Kkl. 3 mit Baumwollanteil)**Sonderausführung:** geschlossene Spitze**Haftbänder:** Spitzenhaftband, Noppenhaftband**Farben:** mode-hell, mode, schwarz

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 6601	 <b>AD ohne Haftband</b>	1	Paar	17.06.10.0024
02 6701		2		17.06.10.1042
02 6801		3		17.06.10.2014
02 6601	 <b>AD mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.10.0024
02 6701		2		17.06.10.1042
02 6801		3		17.06.10.2014
02 6603	 <b>AF ohne Haftband</b>	1	Paar	17.06.11.0030
02 6703		2		17.06.11.1055
02 6803		3		17.06.11.2019
02 6603	 <b>AF mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.11.0030
02 6703		2		17.06.11.1055
02 6803		3		17.06.11.2019
02 6604	 <b>AG ohne Haftband</b>	1	Paar	17.06.12.0023
02 6704		2		17.06.12.1040
02 6804		3		17.06.12.2013
02 6604	 <b>AG mit Haftband</b>	1	Paar	17.06.12.0023
02 6704		2		17.06.12.1040
02 6804		3		17.06.12.2013
02 6647	 <b>AG/T rechts oder links angeben</b>	1	Stück	17.06.12.0023
02 6747		2		17.06.12.1040
02 6847		3		17.06.12.2013
02 6641	 <b>AT</b>	1	Stück	17.06.13.0022
02 6741		2		17.06.13.1038
02 6841		3		17.06.13.2012
02 6643	 <b>AT/U</b>	1	Stück	17.06.13.0022
02 6743		2		17.06.13.1038
02 6843		3		17.06.13.2012



---

## Natürlichkeit ist uns wichtig!

Bei unseren flachgestrickten Kompressionsqualitäten Lastofa Forte mit Merinowolle und Lastofa Extra mit Baumwolle setzen wir bewusst auf die Vorteile von Naturfasern. Denn dank ihnen erzielen wir nicht nur eine exakte Passform, sondern auch einen hohen Tragekomfort: Merinowolle wie auch Baumwolle vereinen hohe Feuchtetransporte mit natürlicher Geruchshemmung und einem angenehmen Temperatenausgleich.

Außerdem zeichnen sich die Naturmaterialien durch ihre besondere Hautfreundlichkeit und ein sehr geringes Allergiepotezial aus. Daher eignen sie sich ideal für medizinische Kompressionsstrümpfe, die einen äußerst intensiven Kontakt zur Haut haben. Für uns ein weiterer Aspekt, Natürlichkeit in den Vordergrund zu stellen.



# lastofa<sup>®</sup> Flachstrick

Die **natürliche, flachgestrickte**  
medizinische Kompression

## **Lastofa Flachstrick**

---

Sonderausführungen und Zusätze 52–53

## **Lastofa Forte** mit Merinowolle

---

Sortimentsübersicht 55–60

Kompressionssegmente Bein 62–64

Kompressionssegmente Arm 66–67

## **Lastofa Extra** mit Baumwolle

---

Sortimentsübersicht 68

Kompressionssegmente Bein 69

Kompressionssegmente Arm 70–71

# Wir verstehen unser Handwerk.

Bei unseren Flachstrickqualitäten gehen medizinische Wirksamkeit und ein angenehmes Tragegefühl Hand in Hand. Für den Therapieerfolg Ihrer Patienten setzen wir deshalb auf modernste Maschinenteknik und aufwendige Handarbeit – natürlich „made in Germany“. So entsteht ein hochwertiges Gestrick, das einen weichen Griff mit hohem Arbeitsdruck kombiniert.

Aufgrund dieser spezialisierten Technik sind wir in der Lage, auf Kundenwünsche zu reagieren und optimale Versorgungsmöglichkeiten auch bei schwierigen anatomischen Verhältnissen zu gewährleisten. Zahlreiche optional erhältliche Zusätze und Sonderausführungen optimieren die Flachstrickversorgung und stärken den Therapieerfolg.

## Sonderausführungen und Zusätze Flachstrick – Maß

**Flachstrick**


<b>Fußform</b>		
offene Fußspitze	pro Fuß	–
geschlossene Fußspitze	pro Fuß	17.99.99.2025
90°-Fuß / T-Ferse	pro Fuß	17.99.99.2030
schräger Fuß ⓘ	pro Fuß	–
offene Ferse bei Narbenversorgung**	pro Fuß	–
<b>Erhöhungen / Einkehren</b>		
laterale Erhöhung am Bein (seitlich) ⓘ	Stück	17.99.99.2026
Knieeinkehr	Stück	17.99.99.2028
Oberbeinerhöhung	Stück	17.99.99.2027
laterale Erhöhung am Arm (seitlich) ⓘ	Stück	17.99.99.2026
<b>Haftbänder</b>	<b>Einheit</b>	<b>Hilfsmittel-Nr.</b>
Noppenhaftband breit / schmal	Paar	17.99.99.2008
Noppenhaftband „Fleur“ (mit Motiv) breit	Paar	17.99.99.2008
Gummihaftband breit / schmal	Paar	17.99.99.2008
elastisches Band breit	Paar	17.99.99.2008
Haftbandstücke 3/4-Umfang	Stück	17.99.99.2016
Haftbandstücke	Stück	17.99.99.2016
extra flache Haftfolie**	Stück	17.99.99.2016
<b>Halterungen Bein</b>		
Hüftbefestigung (Aufpreis zu BG, CG, DG, EG, FG)	Stück	–
Hüftbefestigung Stumpf (Aufpreis zu BG, CG, DG, EG, FG)	Stück	17.99.99.2007
mit Steg	Stück	–
<b>Zwickel</b>		
Standardzwickel	Stück	–
atmungsaktiver Zwickel	Stück	–
kompressiver Zwickel	Stück	–
offener Schritt	Stück	–
Zwickel verstärken	Stück	–

Sonderausführungen und Änderungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Sonderausführungen auf Anfrage.

ⓘ Gemäß den Empfehlungen der BUFA fertigt Ofa Bamberg grundsätzlich schräge Abschlüsse. Sofern Sie dies nicht wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Bestellformular.


**Flachstrick**

## Sonderausführungen und Zusätze Flachstrick – Maß

Leibteile	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
Herrenleibteil mit Querschlit	Stück	17.99.99.2018
Herrenleibteil mit Längsschlit	Stück	17.99.99.2018
kompressives Leibteil	Stück	17.99.99.2003
Slipform 	Stück	17.99.99.2026
Umstandsleibteil	Stück	17.99.99.2019
Stoma-Öffnung	Stück	17.99.99.2020
mit Hüftgurt	Stück	–
elastischer Taillenabschluss (mit oder ohne Klettverschluss)	Stück	–
Zusätze zur Druckverstärkung / Verschlüsse		
Lymphpad DIN A4 (genoppt oder gerippt)	Stück	–
Lymphpad strong	Stück	–
Pelotte, Knöchelpelotte, Lymphpads oder Moosgummi	Stück	–
Pelotte, Knöchelpelotte oder Lymphpads (inklusive Einnähen)	Stück	17.99.99.0002
Tasche für Pelotte, Knöchelpelotte oder Lymphpads	Stück	17.99.99.0002
Futterstoff (inklusive Annähen)	Stück	17.99.99.2031
Klettverschluss kurz	Stück	–
Klettverschluss lang	Stück	–
Reißverschluss kurz – Bein	Stück	17.99.99.2015
Reißverschluss kurz – Arm	Stück	17.99.99.2014
Reißverschluss lang – Bein	Stück	17.99.99.2015
Reißverschluss lang – Arm	Stück	17.99.99.2014
Fixateur	Stück	–
Handschuhe		
Lederabdeckung*	Stück	–
Anti-Rutsch-Beschichtung für Handinnenfläche und 4 Finger**	Stück	–
Smartphone-Finger Stück**	Stück	–
Halterungen Arm		
BH-Halterung (Aufpreis zu AH, CH, DH, EH, FH)	Stück	17.99.99.2013
Individualisierungsmöglichkeiten**		
Schmucknaht Kroko (Strumpffarbe Sand und Laub)***	Paar	–
Schmucknaht Silber (Strumpffarbe Abendrot, Ozean, Schiefer und Lava)***	Paar	–
Schmucknaht Python (Strumpffarbe Schiefer und Lava)***	Paar	–
Schmucknaht Bronze (Strumpffarbe Erde)***	Paar	–
Schmucknaht Rubin (Strumpffarbe Lava)***	Paar	–
Schmucksteinchen (Beinversorgung: Strumpffarbe Erde, Ozean, Schiefer und Lava)	Paar	–
eingestricktes Herz (Fußsohle, Handgelenk oder am Abschluss des Armstrumpfe)	Stück	–
Stumpfstrümpfe		
Stumpfabschluss	Stück	17.06.05.0999

\* Nur für Lastofa Extra erhältlich.

\*\* Nur für Lastofa Forte erhältlich.

\*\*\* Nur für Lastofa Forte erhältlich. Nicht bei Zehenteilen, Handschuhen und einteiligen Armversorgungen.



# lastofa<sup>®</sup> forte


Die **flachgestrickte**  
medizinische Kompression  
mit **Merinowolle**



reddot award 2016  
winner

# Einzigartig innovativ.

Im Inneren des Garns verbirgt sich der Elastankern, der für die Kompressionswirkung wichtig ist. Da er mit Merinowolle und Mikrofaser umwunden ist, kommt das Elastan nicht mit der Haut in Kontakt. **So sorgt das Garn für einen außergewöhnlichen Tragekomfort und einfaches An- und Ausziehen.**

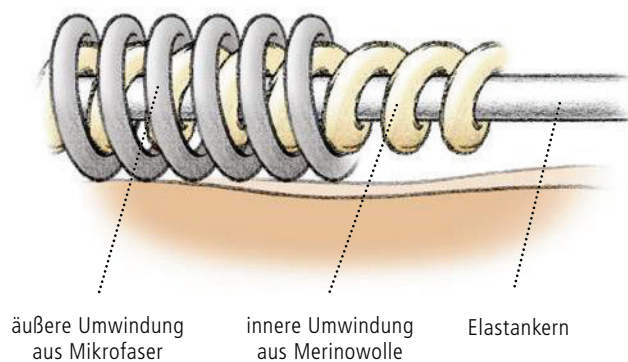

## Die Lastofa Forte Highlights:

- enthält veredelte Merinowolle in Kombination mit Mikrofaser
- außergewöhnlich gutes Tragegefühl durch die besonders feine Struktur der Merinowolle
- klimaregulierend – kühlt im Sommer, wärmt im Winter
- vermindert Gerüche auf natürliche Art
- robust und haltbar



Kkl. 1–4

### Die flachgestrickte medizinische Kompression mit Merinowolle


Lastofa Forte ist unsere flachgestrickte Kompressionsqualität mit Merinowolle. Die Garne sind so aufgebaut, dass die feine und veredelte Merinowolle von Mikrofaser umschlossen wird. Somit ergibt sich eine wahre High-Tech-Konstruktion: Gemeinsam mit dem hochwertigen Funktionsgarn verbindet sich die Merinowolle zu einem einzigartigen Gestrick für hohen Tragekomfort – ganz ohne Kratzen.

Unser Multitalent


Die speziell bei Ödemerkrankungen eingesetzte flachgestrickte Kompressionsqualität bietet einen flächig wirkenden Druck, der besonders unter Bewegung zum Einsatz kommt (hoher Arbeitsdruck). Lastofa Forte wird stets nach individuellen Patientenmaßen gefertigt und sorgt so auch bei schwierigen anatomischen Verhältnissen für eine optimale Passform.

---

Einfaches An- und Ausziehen?  
Natürlich.

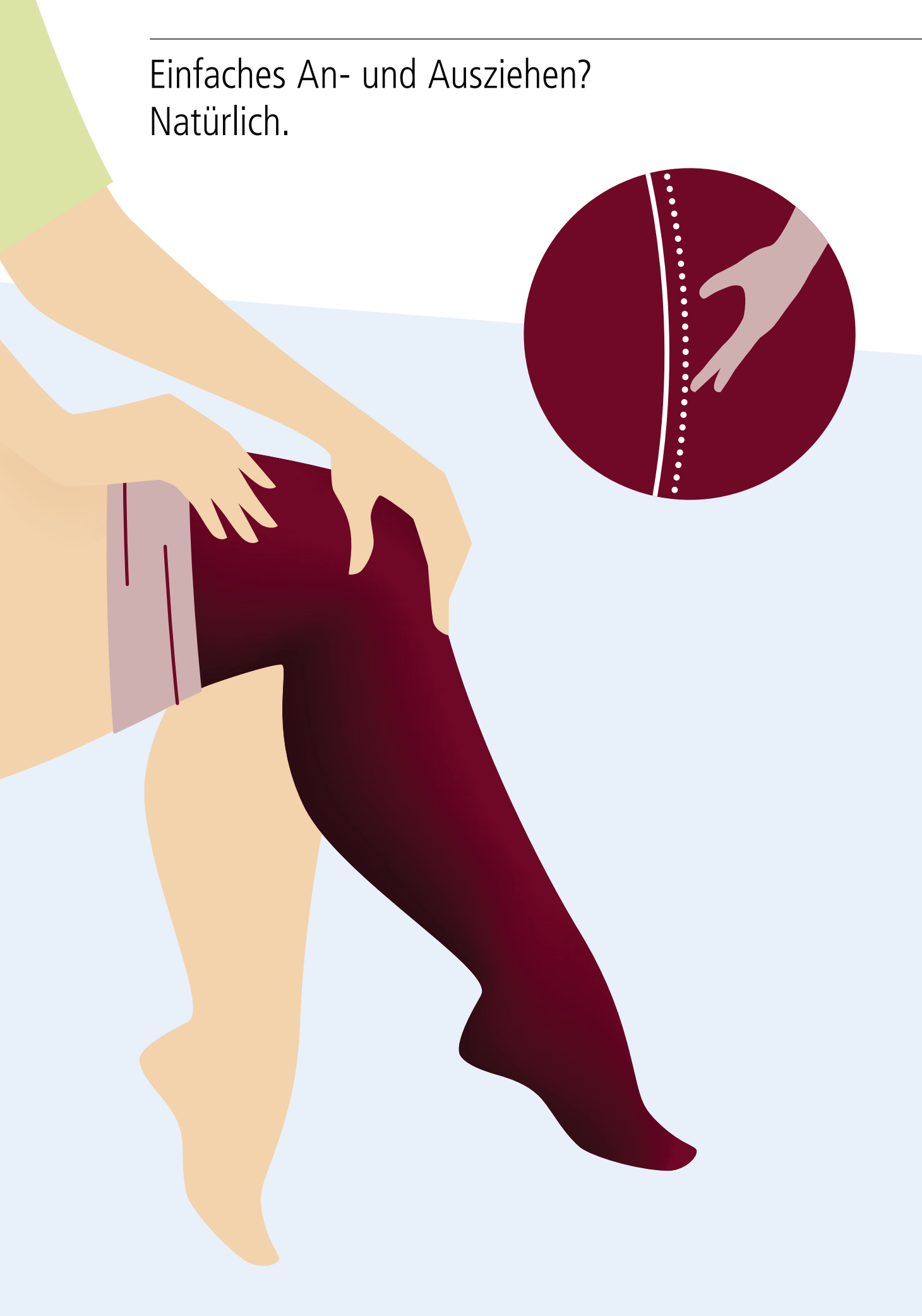

# Tragekomfort? Natürlich.

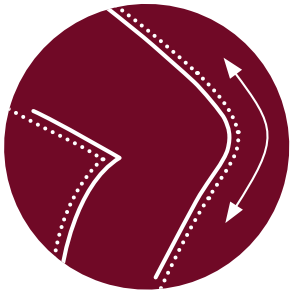


## Hohe Elastizität

Durch seine spezielle Garnkonstruktion ist das Material besonders weich. Dank seiner Längselastizität ist Lastofa Forte flexibel und passt sich optimal an den Körper an. So kommen die Strümpfe selbst an empfindlichen Stellen wie Knie- oder Ellenbeuge ganz ohne optisch auffällige Funktionszonen aus. Weil das Material nicht querelastisch ist und sich somit in der Breite kaum dehnen lässt, behält es stets seine Passform, ohne zu drücken oder einzuschneiden. Dabei sorgt Lastofa Forte stets für gleichbleibende Kompression und einen hohen, flächig wirkenden Arbeitsdruck.




## Klimaregulierung

Da Merinowollfasern aus sehr vielen feinen Einzelfasern bestehen, besitzen sie kleine Luftpolster, die die Körperwärme speichern. So wärmt Merinowolle im Winter. Selbst bei Feuchtigkeit kann Merinowolle ihre wärmende Wirkung entfalten. Die Isolierung der Luftpolster sorgt im Sommer dafür, dass Lastofa Forte weniger Wärme von außen aufnimmt. So schwitzt man deutlich weniger. Darüber hinaus wirkt die Merinowolle geruchs- und schmutzabweisend.

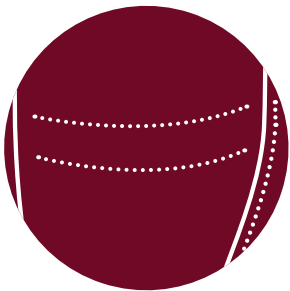

## Optimale Passform

Besondere Anforderungen brauchen besondere Zusätze. Deshalb bietet Ofa beispielsweise eine laterale Erhöhung an, damit sich der Kompressionsdruck von außen ideal auf das Gewebe verteilt. Das wirkt sich zudem positiv auf die Passform und den Tragekomfort aus. Darüber hinaus gibt es noch sehr viel mehr Zusätze. Bei speziellen Bedürfnissen, wie etwa bei Patienten, die im Rollstuhl sitzen, lassen sich z. B. Einkehren am Knöchel stricken, um die Passgenauigkeit zu optimieren und Faltenbildung zu vermeiden.

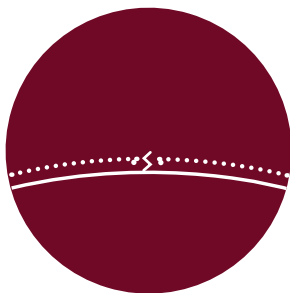

## Extra flache Nähte

Flachgestrickte Kompression hat ein auffälliges Merkmal. Das Gestrick muss mit einer Längsnaht zum Strumpf geschlossen werden. Dabei ist eines besonders wichtig: eine flache Naht, die nicht aufragt und keine Druckstellen verursacht. Bei Lastofa Forte ist die Längsnaht auf der Innenseite sehr flach verarbeitet. Auf der Außenseite der Naht sorgt ein textiles Band für zusätzliche Stabilität. Wer möchte, kann die Naht als optischen Blickfang nutzen – mit edlen Akzenten in Kroko, Python, Bronze, Silber und Rubin.



## Charmanter Therapiebegleiter

Das eingestrickte Herz bei Lastofa Forte soll Patienten daran erinnern, dass sie und ihre Bedürfnisse wichtig sind. So möchten wir Patienten ermutigen, ihre Therapie konsequent durchzuführen und ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Denn das eigene Ich und den eigenen Körper anzunehmen, wertzuschätzen und zu lieben ist unserer Auffassung nach das Herzstück des Selbstmanagements und damit essentiell für das konsequente Umsetzen der KPE. Auf Wunsch strickt Ofa das Herz kostenlos in der Fußsohle, unterhalb des Handgelenkes oder am Abschluss des Armstrumpfes ein.


# Acht Farben – von der Natur inspiriert.

+ 2 Modefarben\*



lastofa forte

**schnee**

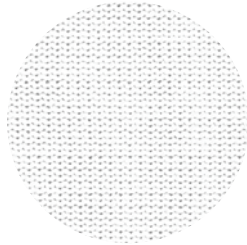


lastofa forte

**sand**



lastofa forte

**laub**

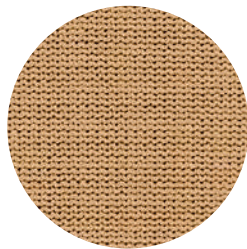

lastofa forte

**abendrot\***



lastofa forte

**erde**



lastofa forte

**ozean**



lastofa forte

**schiefer**



lastofa forte

**lava**





# Das gewisse Etwas? Natürlich.

lastofa forte

**kroko** . Strumpffarbe **sand**



lastofa forte

**kroko** . Strumpffarbe **laub**




lastofa forte

**silber** . Strumpffarbe **abendrot\***



lastofa forte

**silber** . Strumpffarbe **ozean**

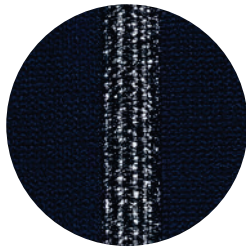


lastofa forte

**silber** . Strumpffarbe **schiefer**



lastofa forte

**silber** . Strumpffarbe **lava**

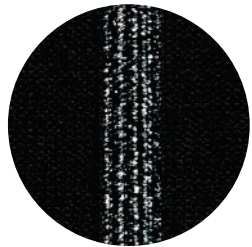

lastofa forte

**python** . Strumpffarbe **schiefer**



lastofa forte

**python** . Strumpffarbe **lava**



lastofa forte

**bronze** . Strumpffarbe **erde**



lastofa forte

**rubin** . Strumpffarbe **lava**



Farbmuster finden Sie im Farblaschenordner, erhältlich bei Ihrem Ofa Fachberater.



Fachstrick


Alle Informationen zu den Modefarben entnehmen Sie bitte dem aktuellen Salesfolder „Mehr Farbe für mehr Individualität“.

\*Erhältlich für Beinversorgungen (nur KKL. 1 – 3), 14 Tage Lieferzeit

# Schmucksteinchen für einen individuellen Weg.

Eine konsequente Ödemtherapie erfordert viel Eigenmotivation und Disziplin. Deshalb sollte die Therapie so individuell wie möglich sein. Die Basis sind flachgestrickte medizinische Kompressionsstrümpfe. **Auffällige Farben, Muster und individuelle Verschönerungen der Kompressionsbestrumpfung sind ein guter Weg, um die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen.** Als neueste Individualisierungsmöglichkeit bieten wir ab sofort schimmernde Schmucksteinchen für unsere einteiligen Beinversorgungen bei Lastofa Forte an.

## Kombinierbar mit folgenden Farben und Schmucknähten

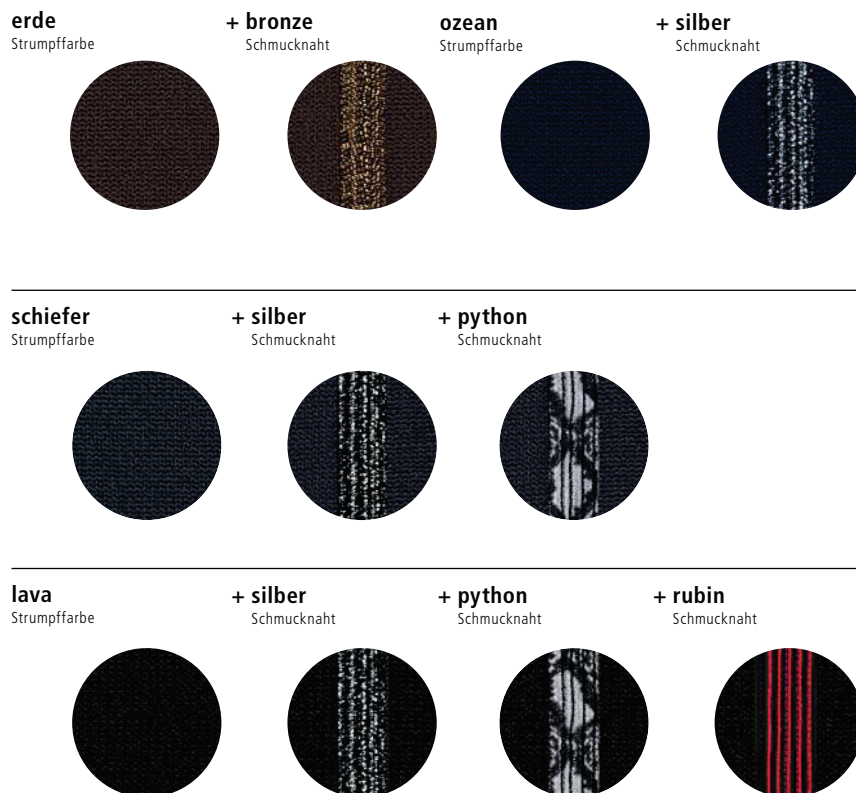

### Ausführung mit Herz

- Auch das kostenlose, eingestrickte Herz kann mit den Schmucksteinchen kombiniert werden
- Es soll die Patienten jeden Tag aufs Neue ermutigen, die Therapie konsequent durchzuführen
- Das Herz wird im Fußteil zwischen Ballen und Ferse eingearbeitet




## Anbringungsbereich und Ausführungen

Die Schmucksteinchen können auf folgenden einteiligen Beinversorgungen von Lastofa Forte angebracht werden:

- AD
- AG
- AT
- AT/U
- BT

Die Steinchen werden bei diesen Ausführungen beginnend mit dem Bereich des **B-Maßes bis zum F-Maß** rundherum angebracht. Unterhalb des B-Maßes oder oberhalb des F-Maßes werden keine Steinchen aufgeklebt. Auch kürzere Bereiche, z. B. von C bis F, sind nicht möglich.

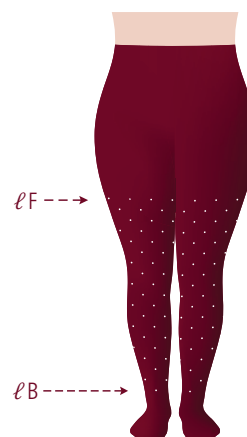

Für nähere Informationen zu möglichen Kombinationen und Zusätzen wenden Sie sich bitte an den Vertriebsinnendienst.



Mehr Individualität?  
Natürlich.

Flachstrick








**Beispiel:**  
Schmucksteinchen auf  
Strumpffarbe Ozean  
und Schmucknaht Silber





## Bein

### Beinstrümpfe

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 2501		1		17.06.14.0016
02 4501	 <b>AD</b> ohne Haftband**	2	Paar	17.06.14.1026
02 6501		3		17.06.14.2024
02 7501		4		17.06.14.3018
02 2504		1		
02 4504	 <b>AG</b> ohne Haftband**	2	Paar	17.06.16.1026
02 6504		3		17.06.16.2024
02 7504		4		17.06.16.3018
02 2547		1		
02 4547	 <b>AG/T</b> rechts, links oder Paar angeben**	2	Stück	17.06.16.1026
02 6547		3		17.06.16.2024
02 7547		4		17.06.16.3018
02 2541		1		
02 4541	 <b>AT**</b>	2	Stück	17.06.17.1025
02 6541		3		17.06.17.2021
02 7541		4		17.06.17.3015
02 2543		1		
02 4543	 <b>AT/U**</b>	2	Stück	17.06.17.1025
02 6543		3		17.06.17.2021
02 7543		4		17.06.17.3015
02 2546		1		
02 4546	 <b>AT/H**</b>	2	Stück	17.06.17.1025
02 6546		3		17.06.17.2021
02 7546		4		17.06.17.3015
02 2545		1		
02 4545	 <b>AT/E</b> Einbeinhose, rechts oder links angeben**	2	Stück	17.06.17.1025
02 6545		3		17.06.17.2021
02 7545		4		17.06.17.3015

Sonderausführungen und Zusätze auf Seite 52 – 53

\* Gemäß den Empfehlungen der BUFA fertigt Ofa grundsätzlich schräge Abschlüsse.  
Sollten Sie keine schrägen Abschlüsse wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Bestellformular.



♥ Auf Wunsch mit eingestricktem Herz (s. Seite 51)



Individuelle Maßanfertigung

Kompressionsklassen: 1, 2, 3, 4







Farben: schnee, sand, laub, abendrot, erde, ozean, schiefer, lava



lastofa® forte

Bein

Kompressionssegmente

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 2550	 <b>BT Legginghose*</b>	1	Stück	17.06.21.0004
02 4550		2		17.06.21.1004
02 6550		3		17.06.21.2004
02 7550		4		17.06.21.3003
02 2552	 <b>CT Caprihose*</b>	1	Stück	17.06.18.0014
02 4552		2		17.06.18.1020
02 6552		3		17.06.18.2018
02 7552		4		17.06.18.3011
02 2554	 <b>ET Bermudahose*</b>	1	Stück	17.06.19.0014
02 4554		2		17.06.19.1020
02 6554		3		17.06.19.2018
02 7554		4		17.06.19.3011
02 2555	 <b>FT Radlerhose*</b>	1	Stück	17.06.22.0003
02 4555		2		17.06.22.1003
02 6555		3		17.06.22.2004
02 7555		4		17.06.22.3003
02 2594	 <b>AA, Fuß- und Zehenteil</b>	1	Stück	17.99.99.2004
02 4594		2		
02 6594		3		
02 2583	 <b>Zehenteil</b>	1	Stück	17.99.99.2023
02 4583		2		
02 6583		3		

Sonderausführungen und Zusätze auf Seite 52–53

\* Gemäß den Empfehlungen der BUFA fertigt Ofa grundsätzlich schräge Abschlüsse. Sollten Sie keine schrägen Abschlüsse wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Bestellformular.



## Bein

### Kompressionssegmente

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 2507	 <b>AB</b> Socke, offene Spitze**	1	Stück	-
02 4507		2		
02 6507		3		
02 7507		4		
02 2505	 <b>AB<sub>1</sub></b> Socke, offene Spitze**	1	Stück	-
02 4505		2		
02 6505		3		
02 7505		4		
02 2521	 <b>BD</b> Wadenstück*	1	Stück	-
02 4521		2		
02 6521		3		
02 7521		4		
02 2522	 <b>BF</b> Beinstück*	1	Stück	-
02 4522		2		
02 6522		3		
02 7522		4		
02 2523	 <b>BG</b> Beinstück*	1	Stück	-
02 4523		2		
02 6523		3		
02 7523		4		
02 2517	 <b>CF</b> Beinstück*	1	Stück	-
02 4517		2		
02 6517		3		
02 7517		4		
02 2518	 <b>CG</b> Beinstück*	1	Stück	-
02 4518		2		
02 6518		3		
02 7518		4		
02 2526	 <b>DF</b> Beinstück*	1	Stück	-
02 4526		2		
02 6526		3		
02 7526		4		
02 2527	 <b>DG</b> Beinstück*	1	Stück	-
02 4527		2		
02 6527		3		
02 7527		4		
02 2528	 <b>EG</b> Oberschenkelstück*	1	Stück	-
02 4528		2		
02 6528		3		
02 7528		4		

Sonderausführungen und Zusätze auf Seite 52 – 53

\*Gemäß den Empfehlungen der BUFA fertigt Ofa grundsätzlich schräge Abschlüsse.  
Sollten Sie keine schrägen Abschlüsse wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Bestellformular.



♥ Auf Wunsch mit eingestricktem Herz (s. Seite 51)

Merinowolle? Natürlich.





## Hand

## Kompressionssegmente

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 2570	 <b>AC</b> , Handschuh ohne Daumen*	1	Stück	17.99.99.2010
02 4570		2		
02 6570		3		
02 2580	 <b>AC</b> , Handschuh mit Daumenansatz*	1	Stück	17.99.99.2011
02 4580		2		
02 6580		3		
02 2581	 <b>AC</b> , Handschuh mit Fingern offene oder geschlossene Finger*	1	Stück	17.99.99.2012
02 4581		2		
02 6581		3		
02 2593	 <b>Fingerling</b> offener oder geschlossener Finger	1	Stück	17.99.99.2023
02 4593		2		
02 6593		3		

Sonderausführungen und Zusätze auf Seite 52 – 53








\* Auf Wunsch mit eingestricktem Herz (s. Seite 51)

Bitte Mindestlängen beim Vertriebsnendienst erfragen.



## Arm

## Kompressionssegmente

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 2586	 <b>CD</b> Unterarmstück**	1	Stück	17.10.05.0008
02 4586		2		17.10.05.1008
02 6586		3		17.10.05.2008
02 2587	 <b>CE</b> Unterarmstück**	1	Stück	17.10.05.0009
02 4587		2		17.10.05.1009
02 6587		3		17.10.05.2009
02 2588	 <b>CF</b> Oberarm-Unterarmstück**	1	Stück	17.10.04.0037
02 4588		2		17.10.04.1040
02 6588		3		17.10.04.2034
02 2577	 <b>CG</b> Oberarm-Unterarmstück**	1	Stück	17.10.04.0041
02 4577		2		17.10.04.1044
02 6577		3		17.10.04.2038
02 2576	 <b>CH</b> Schulter-Unterarmstück*	1	Stück	17.10.04.0040
02 4576		2		17.10.04.1043
02 6576		3		17.10.04.2037

Sonderausführungen und Zusätze auf Seite 52 – 53

\*Gemäß den Empfehlungen der BUFA fertigt Ofa grundsätzlich schräge Abschlüsse. Sollten Sie keine schrägen Abschlüsse wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Bestellformular.



\* Auf Wunsch mit eingestricktem Herz (s. Seite 51)



## Individuelle Maßanfertigung

Kompressionsklassen: 1, 2, 3

Farben: schnee, sand, laub, erde, ozean, schiefer, lava



## Arm

## Kompressionssegmente

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 2571	<b>DF</b> Ellenbogenstück**	1	Stück	-
02 4571		2		
02 6571		3		
02 2572	<b>DG</b> Ellenbogenstück**	1	Stück	-
02 4572		2		
02 6572		3		
02 2536	<b>DH</b> Schulter-Ellenbogenstück*	1	Stück	-
02 4536		2		
02 6536		3		
02 2532	<b>EG</b> Oberarmstück**	1	Stück	-
02 4532		2		
02 6532		3		
02 2533	<b>EH</b> Schulter-Oberarmstück*	1	Stück	-
02 4533		2		
02 6533		3		
02 2589	<b>FG</b> Oberarmstück**	1	Stück	-
02 4589		2		
02 6589		3		
02 2534	<b>FH</b> Schulter-Oberarmstück*	1	Stück	-
02 4534		2		
02 6534		3		
02 2573	<b>AD</b> Unterarm-Handstück ohne Daumenansatz**	1	Stück	17.10.07.0002
02 4573		2		17.10.07.1002
02 6573		3		17.10.07.2002
02 2578	<b>AE</b> Unterarm-Handstück ohne Daumenansatz**	1	Stück	17.10.07.0003
02 4578		2		17.10.07.1003
02 6578		3		17.10.07.2003
02 2579	<b>AF</b> Oberarm-Handstück ohne Daumenansatz**	1	Stück	17.10.06.0009
02 4579		2		17.10.06.1009
02 6579		3		17.10.06.2007
02 2575	<b>AG</b> Oberarm-Handstück ohne Daumenansatz**	1	Stück	17.10.06.0008
02 4575		2		17.10.06.1008
02 6575		3		17.10.06.2006
02 2574	<b>AH</b> Schulter-Handstück ohne Daumenansatz*	1	Stück	17.10.06.0007
02 4574		2		17.10.06.1007
02 6574		3		17.10.06.2005

Sonderausführungen und Zusätze auf Seite 52–53

\*Gemäß den Empfehlungen der BUFA fertigt Ofa grundsätzlich schräge Abschlüsse.  
Sollten Sie keine schrägen Abschlüsse wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Bestellformular.



\*\* Auf Wunsch mit eingestricktem Herz (s. Seite 51)

Art.-Nr.	Ausführung	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 4585	<b>BH-Halterung</b>	Stück	17.99.99.0013

# lastofa<sup>®</sup> extra

Die **flachgestrickte**  
medizinische Kompression  
mit **Baumwolle**



Kkl. 1–4

## Die flachgestrickte medizinische Kompression mit Baumwolle









Unser Klassiker im Flachstrickbereich weist einen hohen Baumwoll-Anteil auf, der direkt auf der Haut aufliegt – nicht nur spürbar, sondern auch sichtbar! Gerade sensible und empfindliche Haut kommt so nur mit der Naturfaser in Berührung, die ein sehr geringes Allergiepotezial besitzt.

Lastofa Extra verfügt über einen flächig wirkenden Druck, der gerade bei Bewegung die Wirkung der Kompression voll entfaltet. Alle Versorgungen werden nach individuellen Patientenmaßen gefertigt und bieten auch bei schwierigen anatomischen Verhältnissen eine exakte Passform.

Unser Klassiker

- 40 % Baumwolle direkt auf der Haut
- besonders hautfreundlich durch weiche und anschmiegsame Naturfaser
- geeignet für empfindliche und zu Allergien neigende Haut
- wärme- und feuchtigkeitsregulierend

**Individuelle Maßanfertigung****Standard:** offene Spitze**Kompressionsklassen:** 1, 2, 3, 4**Farben:** beige, schwarz**Flachstrick****lastofa® extra****Bein****Beinstrümpfe – Kompressionssegmente**

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 2401	 <b>AD</b> ohne Haftband*	1	Paar	17.06.14.0011
02 4401		2		17.06.14.1015
02 6401		3		17.06.14.2015
02 7401		4		17.06.14.3010
02 2404	 <b>AG</b> ohne Haftband*	1	Paar	17.06.16.0011
02 4404		2		17.06.16.1015
02 6404		3		17.06.16.2015
02 7404		4		17.06.16.3010
02 2441	 <b>AT</b> *	1	Stück	17.06.17.0011
02 4441		2		17.06.17.1012
02 6441		3		17.06.17.2011
02 7441		4		17.06.17.3008
02 2450	 <b>BT</b> Legginghose*	1	Stück	17.06.21.0003
02 4450		2		17.06.21.1003
02 6450		3		17.06.21.2003
02 7450		4		17.06.21.3004
02 2452	 <b>CT</b> Caprihose*	1	Stück	17.06.18.0009
02 4452		2		17.06.18.1007
02 6452		3		17.06.18.2007
02 7452		4		17.06.18.3005
02 2454	 <b>ET</b> Bermudahose*	1	Stück	17.06.19.0009
02 4454		2		17.06.19.1007
02 6454		3		17.06.19.2007
02 7454		4		17.06.19.3005
02 2455	 <b>FT</b> Radlerhose*	1	Stück	17.06.22.0004
02 4455		2		17.06.22.1004
02 6455		3		17.06.22.2005
02 7455		4		17.06.22.3004
02 2494	 <b>AA</b> , Fuß- und Zehenteil offene oder geschlossene Zehen	1	Stück	17.99.99.2004
02 4494		2		
02 6494		3		
02 2483	 <b>Zehenteil</b> offene oder geschlossene Zehe	1	Stück	17.99.99.2023
02 4483		2		
02 6483		3		

Sonderausführungen und Zusätze auf Seite 52–53  
 Weitere Lastofa Extra Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

\*Gemäß den Empfehlungen der BUFA fertigt Ofa grundsätzlich schräge Abschlüsse.  
 Sollten Sie keine schrägen Abschlüsse wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Bestellformular.



## Hand

## Kompressionssegmente






Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 2470	 <b>AC</b> , Handschuh ohne Daumen	1	Stück	17.99.99.2010
02 4470		2		
02 6470		3		
02 2480	 <b>AC</b> , Handschuh mit Daumenansatz	1	Stück	17.99.99.2011
02 4480		2		
02 6480		3		
02 2481	 <b>AC</b> , Handschuh mit Fingern offene oder geschlossene Finger	1	Stück	17.99.99.2012
02 4481		2		
02 6481		3		
02 2493	 <b>Fingerling</b> offener oder geschlossener Finger	1	Stück	17.99.99.2023
02 4493		2		
02 6493		3		

Sonderausführungen und Zusätze auf Seite 52 – 53



## Arm

## Kompressionssegmente

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 2486	 <b>CD</b> Unterarmstück*	1	Stück	–
02 4486		2		
02 6486		3		
02 2487	 <b>CE</b> Unterarmstück*	1	Stück	–
02 4487		2		
02 6487		3		
02 2488	 <b>CF</b> Oberarm-Unterarmstück*	1	Stück	–
02 4488		2		
02 6488		3		
02 2477	 <b>CG</b> Oberarm-Unterarmstück*	1	Stück	17.10.04.0026
02 4477		2		17.10.04.1027
02 6477		3		17.10.04.2024
02 2476	 <b>CH</b> Schulter-Unterarmstück	1	Stück	17.10.04.0027
02 4476		2		17.10.04.1028
02 6476		3		17.10.04.2025

Sonderausführungen und Zusätze auf Seite 52 – 53

\*Gemäß den Empfehlungen der BUFA fertigt Ofa grundsätzlich schräge Abschlüsse.  
Sollten Sie keine schrägen Abschlüsse wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Bestellformular.





Arm  
Kompressionssegmente

Art.-Nr.	Ausführung	Kkl.	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 2471	<b>DF</b> Ellenbogenstück*	1	Stück	-
02 4471		2		
02 6471		3		
02 2472	<b>DG</b> Ellenbogenstück*	1	Stück	-
02 4472		2		
02 6472		3		
02 2436	<b>DH</b> Schulter-Ellenbogenstück	1	Stück	-
02 4436		2		
02 6436		3		
02 2432	<b>EG</b> Oberarmstück*	1	Stück	-
02 4432		2		
02 6432		3		
02 2433	<b>EH</b> Schulter-Oberarmstück	1	Stück	-
02 4433		2		
02 6433		3		
02 2489	<b>FG</b> Oberarmstück	1	Stück	-
02 4489		2		
02 6489		3		
02 2434	<b>FH</b> Schulter-Oberarmstück	1	Stück	-
02 4434		2		
02 6434		3		
02 2473	<b>AD</b> Unterarm-Handstück ohne Daumenansatz*	1	Stück	17.10.07.0005
02 4473		2		17.10.07.1005
02 6473		3		17.10.07.2005
02 2478	<b>AE</b> Unterarm-Handstück ohne Daumenansatz*	1	Stück	17.10.07.0004
02 4478		2		17.10.07.1004
02 6478		3		17.10.07.2004
02 2479	<b>AF</b> Oberarm-Handstück ohne Daumenansatz*	1	Stück	17.10.06.0012
02 4479		2		17.10.06.1012
02 6479		3		17.10.06.2010
02 2475	<b>AG</b> Oberarm-Handstück ohne Daumenansatz*	1	Stück	17.10.06.0013
02 4475		2		17.10.06.1010
02 6475		3		17.10.06.2011
02 2474	<b>AH</b> Schulter-Handstück ohne Daumenansatz*	1	Stück	17.10.06.0014
02 4474		2		17.10.06.1011
02 6474		3		17.10.06.2012

Sonderausführungen und Zusätze auf Seite 52–53

\*Gemäß den Empfehlungen der BUFA fertigt Ofa grundsätzlich schräge Abschlüsse.  
Sollten Sie keine schrägen Abschlüsse wünschen, vermerken Sie dies bitte auf dem Bestellformular.

Art.-Nr.	Ausführung	Einheit	Hilfsmittel-Nr.
02 4485	<b>BH-Halterung</b>	Stück	17.99.99.0013








## Waschtipps

Das Produkt ist für den sofortigen Gebrauch geeignet. Wir empfehlen, Kompressionsstrümpfe vor dem ersten Tragen – auf links gedreht – zu waschen. Danach bitte täglich von Hand oder im Schonwaschgang Ihrer Maschine waschen. Einzig unsere Flachstrickqualität Lastofa Forte sollte auf rechts gewaschen werden.

Dies sorgt nicht nur für Hygiene, sondern die regelmäßige Wäsche ist auch wichtig, um die Kompressionswirkung zu erhalten. Das elastische Material der Kompressionsstrümpfe verträgt keinen Weichspüler. Es sollte daher ein Feinwaschmittel benutzt werden. Aber auch das kann Weichspüler enthalten, der nicht deklariert werden muss. Bestens geeignet ist daher Ofa Clean, das besonders milde Spezial-Waschmittel von Ofa, das garantiert keinen Weichspüler enthält (siehe Seite 91).

 Memory und Lastofa Kompressionsstrümpfe können bei 40°C von Hand oder im Schonwaschgang der Maschine gewaschen werden. Die Gilofa und Ofa 365 Strümpfe sollten bei maximal 30°C von Hand oder im Schonwaschgang der Maschine gewaschen werden. In der Maschine darf ein schonender Schleudergang mit niedriger Drehzahl folgen.

  Bei Handwäsche sollten die Strümpfe gut ausgespült und dann auf einem Handtuch oder an der Luft getrocknet werden. Es ist auch möglich, sie bei kleinster Stufe im Trockner zu trocknen. Starke Hitze, also auch die Heizung und das Bügeleisen, verschleißt das Material stark und sollte deshalb unbedingt vermieden werden.

## Tipps zur Pflege der Kompressionsstrümpfe

Kompressionsstrümpfe sind weitgehend unempfindlich gegen Fette und Öle, sollten aber nicht mit Salben in Kontakt kommen. Strümpfe mit silikonbeschichteten Haftbändern sollten auch nicht mit Lösungsmitteln, sowie rückfettenden Waschlotionen und Cremes in Berührung kommen. Die Funktion der Haftbänder kann sonst dauerhaft beeinträchtigt werden.

Faserknötchen, das sogenannte Pilling, die sich durch Reibung an anderen Kleidungsstücken bilden können, mindern die Qualität des Strumpfes nicht.

Eine regelmäßige Fußpflege und einwandfreies Schuhwerk sind Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer der Kompressionsstrümpfe. Beschädigte Strümpfe sollten nicht selbst repariert, sondern zum Fachhändler gebracht werden.

## Indikationen (siehe auch Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie AWMF 037/005, Stand 12/18)

- Verbesserung venöser Symptome und der Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten
- Prävention und Therapie venöser Ödeme
- Prävention und Therapie venöser Hautveränderungen
- Ekzem und Pigmentierung
- Dermatoliposklerose und Atrophie blanche
- Therapie und Schmerzreduktion bei Ulcus cruris venosum, auch Rezidivprophylaxe
- Therapie des arteriell und venös bedingten Ulcus cruris (siehe Kontraindikationen!)
- Varikose
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Funktionelle venöse Insuffizienz
- Venöse Malformationen
- Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose
- Postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- Lymphödeme
- Ödeme in der Schwangerschaft
- Posttraumatische/postoperative Ödeme
- Zyklisch idiopathische Ödeme
- Lipödeme ab Stadium II

- Stauungszustände infolge von Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität)
- Berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe)
- Medikamentös bedingte Ödeme, wenn keine Umstellung möglich ist
- Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit, Schwindel und Stauungsschwerden in der Schwangerschaft
- Zustand nach Verbrennungen
- Narbenbehandlung

## Kontraindikationen

### Absolute Kontraindikationen:

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Dekompensierte Herzinsuffizienz
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

### Relative Kontraindikationen:

- Nässende Dermatosen
- Unverträglichkeiten auf Kompressionsstrumpfmateriale
- Schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
- Fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. Diabetes mellitus)
- Chronische Polyarthrit

## Bei Nichtbefolgung dieser Kontraindikationen wird jede Haftung abgelehnt.

## Risiken und Nebenwirkungen

Bei empfindlicher Haut kann es unter den Kompressionsstrümpfen zu Juckreiz und Hautproblemen kommen. Daher wird eine adäquate Hautpflege empfohlen.

Bei folgenden Symptomen die Strümpfe bitte umgehend ausziehen und die Fortführung der Therapie mit dem Arzt besprechen: Blau- oder Weißfärbung der Zehen, Missempfindungen und Taubheitsgefühle, zunehmende Schmerzen, Kurzatmigkeit und Schweißausbrüche, akute Bewegungseinschränkungen.

## Gewährleistung

Die Lagerfähigkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen ist bei sachgemäßer Lagerung auf 3 Jahre begrenzt. Hinzu kommt die Tragezeit, die bei regelmäßigem Gebrauch und ordnungsgemäßer Pflege maximal 6 Monate beträgt. Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von der Gewährleistung ausgenommen. Grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, welche auf

üblichen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerfirma durchgeführt worden ist.

Das Produkt ist zur Versorgung eines einzigen Patienten vorgesehen. Wird es zum Wiedereinsatz an andere Personen weitergegeben, erlischt die Produkthaftung des Herstellers.

## Entsorgung

Nach Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie das Produkt bitte gemäß den örtlichen Bestimmungen.

## Meldepflicht

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind Patienten und Anwender verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene schwerwiegende Vorfälle, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod geführt haben oder hätten führen können, dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM) unverzüglich zu melden.

Wir freuen uns auf  
Ihren Anruf:  
0951 6047-333

Besuchen Sie uns  
auch auf:



**ofa**<sup>®</sup>

**Ofa Bamberg GmbH**  
Laubanger 20  
96052 Bamberg  
Tel. + 49 951 6047-333  
Fax + 49 951 6047-180  
vertriebsinnendienst@ofa.de  
www.ofa.de



Die Farbdarstellungen können produktionsbedingt von der Originalqualität abweichen.  
RWL 57230924 | FWL 099124 | Rev.-Nr. 1/04/2023